


Инструкция по эксплуатации

AVEX

Массажная подушка
LY-728B

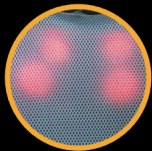

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	5
Описание.....	5
Особенности массажной подушки AVEX.....	6
Меры предосторожности перед началом использования.....	6
Влияние длинноволнового инфракрасного излучения на организм человека.....	8
Влияние вибромассажа на организм человека.....	9
Рекомендации по использованию.....	10
Таблица активных точек.....	10
Эксплуатация.....	12
Меры безопасности.....	12
Уход и хранение.....	13
Устранение неполадок.....	14
Указания по утилизации.....	14
Гарантийное обслуживание.....	16
Гарантийный талон.....	17
Сервисные центры «AVEX».....	19



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки AVEX. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраняйте ее в течение всего срока использования устройства.

Компания «Интер-Трейд» предлагает богатый ассортимент товаров т. м. AVEX для дома и кухни, а также продукты для персонального ухода. Техника AVEX - это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших домашних забот, помогут готовить вкусные блюда или заботиться о красоте и здоровье. Продукты компании сочетают утонченный дизайн, функциональность и доступные цены, а также соответствуют требованиям самых высоких мировых стандартов качества.

Цель компании - угодить даже самому взыскательному покупателю, поэтому компания производит постоянные исследования потребностей рынка и активно развивает послепродажный сервис. Все это в совокупности становится основой для долгосрочных и стабильных взаимоотношений с клиентами.

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА AVEX – это новый незаменимый прибор, который в кратчайшее время поможет справиться с напряжением мышц, снять стресс и вернуть хорошее самочувствие и настроение. Универсальность массажной подушки обеспечивает возможность эффективного воздействия на любую часть тела, а новый дизайн и небольшой размер позволят использовать ее практически в любом месте. Массажная подушка AVEX – это идеальное средство для тех, кто проводит много времени за компьютером или за рулем автомобиля. Два режима работы массажной подушки – вибромассаж и вибромассаж с инфракрасным излучением – помогут вернуть легкость и гибкость Вашему телу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная мощность: 25 Вт
Габариты в упаковке: 380*140*307 мм
Время непрерывной работы: 15 мин
Адаптер на 12В



ОПИСАНИЕ

- 1 – массажная подушка
- 2 – переключатель режимов работы ВКЛ./ВЫКЛ. (инфракрасное излучение)
- 3 – пульт управления
- 4 – лампочка работы
- 5 – зарядное устройство
- 6 – массажные ролики
- 7 – переключатель направления движения массажных роликов (по часовой стрелке – «Старт», против часовой стрелки – «Реверс»)
- 8 – кнопка контроля интенсивности массажа

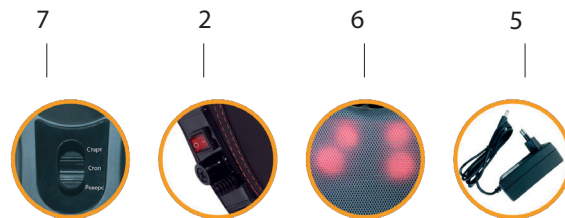

** В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик, дизайна, конструкции и комплектации без уведомления потребителя*

ОСОБЕННОСТИ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ AVEX

- Возможность использования массажной подушки в любом месте, например, дома во время просмотра любимых телепередач или в машине. Ее небольшой размер и компактный дизайн сделают массажную подушку AVEX Вашим надежным и универсальным помощником.
- Наличие пульта управления для массажной подушки сделает процесс эксплуатации еще более удобным и комфортным.
- Движение массажных роликов по- и против часовой стрелки имитирует массаж руками, придавая ощущение, что Вас разминает профессиональный массажист.
- Оптимальный размер массажных роликов обеспечит максимальный комфорт во время массажа.
- Мягкое воздействие массажной подушки на активные точки тела и стимуляция нервных окончаний послужат активизации кровообращения в организме, повышению жизненного тонуса, а также зарядят энергией и оптимизмом.
- Вибромассаж совместно с инфракрасным излучением улучшит клеточный метаболизм, укрепит мышцы, улучшит кровоснабжение сосудов, способствуя выведению шлаков.
- Массажная подушка AVEX поможет расслабиться, улучшить самочувствие и заметно поднимет настроение, где бы вы ни находились.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Используйте прибор только в соответствии с настоящей инструкцией.
- Данный прибор предназначен исключительно для массажа. Он не является медицинским прибором и не предназначен для лечения болезней.
- Перед использованием, в случае возникновения сомнений в возможности использования и применения прибора, необходимо обратиться за консультацией к Вашему лечащему врачу.
- Не используйте прибор более 15 минут.
- Не используйте прибор перед сном и лежа в постели.
- Не оставляйте включенный прибор на постели или на ковровых покрытиях во избежание пожара.
- Не используйте прибор на поврежденной поверхности кожи.
- Во избежание механических повреждений кожи не производите слишком интенсивный массаж.

- Не используйте прибор для массажа области лица, шеи и других чувствительных участков тела.
- Избегайте попадания жидкости на корпус прибора.
- Не используйте прибор при обнаружении повреждений корпуса.
- Не используйте прибор при высоких температурах и во влажных помещениях, таких как ванная комната.
- При эксплуатации не накрывайте прибор.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. После каждого применения обязательно вынимайте штепсельную вилку из розетки.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором без присмотра взрослых.
- Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием прибора при наличии следующих состояний:
 - В период острых воспалительных процессов;
 - В послеоперационный период;
 - При прохождении курса лечения;
 - При повышенном/пониженном артериальном давлении, заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
 - При повышенной температуре и общем недомогании;
 - При заболеваниях желчного пузыря и почек;
 - При нарушении кровообращения;
 - При онкологических, кожных и аллергических заболеваниях;
 - При болезнях костей и ослаблении костного аппарата организма;
 - При наличии медицинских имплантатов;
 - При беременности и в послеродовой период;
 - Детям грудного возраста и детям до 14 лет без присмотра взрослых;
 - Людям с ограниченными физическими и умственными возможностями без присмотра родственников или людей, отвечающих за их состояние.

ВЛИЯНИЕ ДЛИННОВОЛНОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

- Инфракрасное излучение укрепляет иммунитет.
- Стимулирует обменные процессы.
- Снимает усталость и внутримышечное напряжение.
- Борется с заболеваниями кровеносных сосудов.
- Активирует выработку инсулина.
- Стимулирует умственные процессы.
- Очищает организм от токсинов.
- Обладает омолаживающим эффектом.
- Стимулирует кроветворение.
- Регулирует артериальное давление.
- Борется с варикозным расширением вен.
- Способствует быстрому заживлению ран после травм и в послеоперационный период.
- Облегчает симптомы ревматизма, артрита, артроза, воспаления суставов, облегчает боли в спине.
- Борется с целлюлитом.
- Очищает организм от токсинов и шлаков.
- Снимает хронические боли в мышцах, напряжение мышц.
- Помогает при заболеваниях нервной системы, стрессах, уменьшает состояние общей нервозности, помогает при бессоннице.
- Оказывает общий оздоровительный эффект, увеличивает сопротивляемость организма, ускоряет восстановительные процессы, активизирует функции обмена веществ.
- Помогает при простудных заболеваниях, пневмонии, болезнях уха, горла, носа.
- Полезно при косметических проблемах, для регенерации кожи и придания ей упругости.

ВЛИЯНИЕ ВИБРОМАССАЖА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

- Вибромассаж улучшает состояние кожи: во время массажа удаляются чешуйки эпидермиса кожи, расширяются кровеносные сосуды, усиливается кровообращение и лимфообращение в коже и мышечных волокнах. Кроме этого, улучшается функция сальных и потовых желез, кожа становится эластичной и бархатистой.
- Нормализует обмен веществ, способствует похудению.
- Способствует избавлению от целлюлита и «апельсиновой корки», действуя опосредованно на жировую ткань, вибрационный массаж способствует «сгоранию» жиров.
- Повышает работоспособность мышц, восстанавливает мышцы после усиленных физических нагрузок, снимает утомление, замедляет мышечную атрофию.
- Снимает мышечную боль.
- Благоприятно влияет на кровеносную и лимфатическую систему: улучшает кровоток, газообмен, способствует ускорению лимфотока (лечение варикозного расширения вен, отеков).
- Оказывает существенное влияние на суставы: улучшается кровоснабжение сустава и периартикулярных тканей, укрепляется связочный аппарат сустава.
- Влияет на нервную систему: слабые амплитудные и частотные колебания повышают возбудимость поврежденных нервов (при порезах и параличах), вибрации средней интенсивности еще более усиливают возбуждение, сильные вибрации понижают возбудимость нервных волокон (при невралгии и судорогах).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Массажная подушка AVEX обеспечивает массаж, прогревание и позволяет разминать шею, воротниковую зону, спину и поясницу.

Прибор работает в двух режимах:

1. Вибромассаж;
2. Вибромассаж с инфракрасным прогреванием.

Массажные ролики позволяют прогреть и промассировать большую часть поверхности тела. Массажную подушку рекомендуется использовать для воздействия в выбранном режиме на проблемные зоны. Продолжительность массажа не должна превышать 2-3 минуты на определенную зону или группу мышц. Общая длительность сеанса должна составлять не более 15 минут.


ТАБЛИЦА АКТИВНЫХ ТОЧЕК

На теле человека находится около 650 активных точек. Каждая точка соответствует какому-либо органу или состоянию организма. Массаж может улучшать циркуляцию крови, активировать обмен веществ и повышать сопротивляемость организма инфекциям и вирусам.

Массаж, который осуществляется путем надавливания и прикосновений, называется массажем Шиацу.

Словосочетание “Шиацу” состоит из слов “ши” - пальцы и “ацу” - надавливание и обозначает лечение заболеваний путём осуществления нажима пальцами. Метод основывается главным образом на опыте, выработанном в процессе практической деятельности. По своей сути, массаж Шиацу - это надавливание на акупунктурные точки, которые расположены по всему телу. При массаже Шиацу, использующем прямое надавливание на определённые точки, достигается наиболее действенный эффект по сравнению с другими видами массажа. Шиацу оказывает не только лечебное действие, которое активизирует внутренние возможности организма, но и мобилизует его защитные силы, тем самым предотвращая развитие возможного заболевания.

Ниже приводится схема расположения основных акупунктурных точек на теле человека:

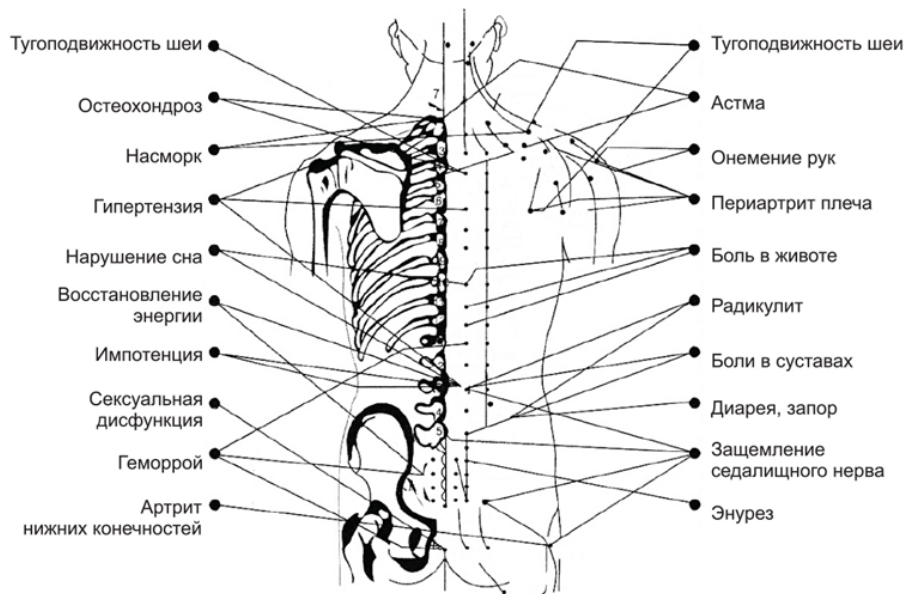

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует напряжению, указанному на этикетке прибора.
2. При подключении прибора к сети загорится лампочка работы на пульте управления.
3. Установите переключатель направления движения массажных роликов на пульте управления в положение «Старт» и поверните кнопку контроля интенсивности массажа по часовой стрелке. При этом массажные ролики начнут движение по часовой стрелке. Поворачивая кнопку контроля интенсивности массажа далее по часовой стрелке, Вы увеличите скорость движения массажных роликов.
4. Установите переключатель направления движения массажных головок на пульте управления в положение «Стоп» и движение массажных роликов прекратится.
5. Если Вы хотите, чтобы массажные ролики двигались в противоположном направлении, установите переключатель направления движения массажных головок на пульте управления в положение «Реверс».
6. Чтобы уменьшить интенсивность массажа и снизить скорость вращения массажных роликов, поверните кнопку контроля интенсивности массажа против часовой стрелки.
7. Если Вы хотите включить режим «массаж с инфракрасным прогреванием», установите переключатель режима работы массажной подушки в положение ВКЛ. Если Вы установите переключатель в положение ВЫКЛ., данный режим будет отключен.
8. Производите массаж в соответствии с рекомендациями настоящего руководства по эксплуатации.
9. После завершения использования отключите прибор и выньте штепсельную вилку из розетки питания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Проверьте, соответствует ли напряжение Вашей домашней сети техническим характеристикам, указанным на этикетке прибора.
- Не отсоединяйте штепсельную вилку от розетки мокрыми руками.
- Во избежание удара электрическим током или поломки изделия не допускайте попадания воды на прибор.
- Избегайте повреждения проводов и частой смены режимов работы прибора.
- Не используйте влажную ткань для очистки электрических частей прибора, таких как выключатель и штепсельная вилка.
- Если возникают проблемы при использовании прибора, отключите прибор от сети и свяжитесь с сервисным центром.

- Ремонт данного изделия должны осуществлять только специалисты авторизованного сервисного центра. Пользователям запрещено разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно.
- Если во время использования прибора произошло ухудшение самочувствия, завершите работу с прибором и проконсультируйтесь с врачом.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Если Вы не планируете использовать прибор в течение длительного времени, сложите его в коробку и поместите в чистое и сухое место.
- Не храните прибор в помещениях с высокими температурами или вблизи огня.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на прибор.
- Для очистки массажной подушки протирайте ее сухой и чистой тканью. Не используйте растворитель, бензол, спирт и другие агрессивные вещества для очистки.
- Механические составные части прибора разработаны и изготовлены таким образом, что специальный уход за прибором не потребуются.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

№	НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
1	Не работает мотор	<ul style="list-style-type: none">• Штепсельная вилка не плотно вставлена в розетку.• Переключатель направления движения массажных головок на пульте управления установлен в положение «Стоп».• Поворотный механизм кнопки контроля интенсивности массажа установлен в положение ВЫКЛ.	<ul style="list-style-type: none">• Вставьте вилку в розетку.• Установите переключатель в положение «Старт» либо в положение «Реверс».• Установите поворотный механизм кнопки контроля интенсивности массажа в положение ВКЛ.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство включает в себя электрические и электронные компоненты и не пригодно для утилизации вместе с бытовым мусором. Обязательно учитывайте действующее государственное и местное законодательство по утилизации электрического оборудования. При этом выполняйте требования директивы «Об утилизации электрического и электронного оборудования».

Упаковка и сам прибор сделаны из материалов, которые можно использовать повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер для повторно используемых материалов. Также Вы можете сдать прибор в специальный пункт приема электроприборов на переработку. Сдав устройство по окончании срока его службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания «Интер-Трейд» выражает благодарность за Ваш выбор и, при соблюдении правил эксплуатации, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование массажной подушки AVEХ. Данное изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, насекомых. В течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации и иные документы).



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие руководства по эксплуатации и заполненного гарантийного талона.

Перед началом эксплуатации изделия просим внимательно ознакомиться с инструкцией.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых явились попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, чехлов из ткани, кожи, пластиковых и металлических деталей и др. материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

AVEX ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЕРИЯ АХ

№ _____

Заполняется сервисным центром

Внимание! Пожалуйста, приобретите от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	

	Дата приёма
	Дата выдачи
	Особые отметки

A

*Печать
Сервисного центра*

Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	

	Дата приёма
	Дата выдачи
	Особые отметки

B

*Печать
Сервисного центра*

Талон фирмы-продавца	

Исправное изделие в полном комплекте,
с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии, списком сервисных центров ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя:

Сведения об установке изделия	
Фирма-установщик	
Номер сертификата	
Дата установки	
Мастер	

	Дата приёма
	Дата выдачи
	Особые отметки

B

*Печать
Сервисного центра*

Заполняется установщиками

ИЗ МНОГООБРАЗИЯ ЛУЧШЕЕ

Продукты торговой марки «AVEX» обладают следующими преимуществами по сравнению с продуктами других марок:

- Широкой модельный ряд;
- 1 год гарантии на всю технику;
- Качественное сервисное обслуживание;
- Сертификаты соответствия на все товары;
- Наличие авторизованных сервисных центров практически в каждом регионе РФ.

Мы рады предложить Вам другие продукты торговой марки «AVEX», среди которых холодильное оборудование, климатическая техника, техника для дома, техника для кухни и многое другое.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «AVEX» Вы всегда сможете найти на наших сайтах: www.avex-bt.ru, www.diorit.ru .



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ AVEX

Телефон единой сервисной линии

8-800-700-1225

(звонок по России бесплатный)

www.diorit.ru

avex@diorit.ru

www.avex-bt.ru




Производитель: Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.

Адрес: Songqiao Industrial Park, Pingyang, Wenzhou, P.R.China

Импортер: ООО «Интер-Трейд», 347800, Россия, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152, e-mail: avex@diorit.ru

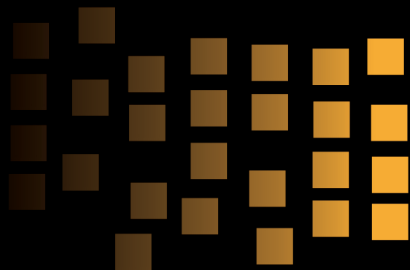

www.avex-bt.ru

Производитель: Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd.
Адрес: Songqiao Industrial Park, Pingyang, Wenzhou, P.R.China

Импортер: ООО «Интер-Трейд», 347800, Россия, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152,
e-mail: avex@diorit.ru

