

beurer KR 40



RUS **Электродушка- валик**
Инструкция по применению

Объяснение условных знаков на этикетке



Читайте указания по применению!



Не использовать в сложенном или не расправленном состоянии!



Не втыкать иголок!



Использованные в этом приборе ткани соответствуют высоким требованиям стандарта Öko-Tex 100, что подтверждено Исследовательским институтом Хохенштайн.

РУССКИЙ

Многоуважаемый покупатель!

Мы рады тому, что Вы выбрали товар из нашего ассортимента. Изделия нашей компании являются товарами высочайшего качества, используемых для измерения веса, артериального давления, температуры тела, частоты пульса, в области мягкой терапии и массажа. Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего использования, дайте ее прочитать и другим пользователям и строго следуйте приведенным в ней указаниям.

С дружескими пожеланиями
сотрудники компании Veurer

Объем поставки:

1 подушка-валик, 1 чехол, 1 выключатель, данная инструкция по применению

1. Важные указания по технике безопасности – внимательно прочесть и сохранить для последующего использования

Несоблюдение приведенных ниже указаний может приводить к травмам людей или материальному ущербу (поражению электрическим током, ожогам кожи, пожару). Приведенные ниже указания служат не только для защиты Вашего здоровья и здоровья других людей, но и для защиты самого изделия. Поэтому строго соблюдайте эти указания и передавайте данную инструкцию новому пользователю при передаче изделия.

- Используйте данную подушку-валик только в целях, описанных в данной инструкции.
- Данная подушка-валик не предназначена для использования в больницах.
- Данная подушка-валик не предназначена для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц.
- Не использовать для людей, находящихся в беспомощном состоянии, грудных детей или лиц, не чувствительных к теплу (например, диабетиков, лиц с изменениями кожи, вызванными заболеваниями, или с зарубцевавшимися участками кожи в области применения, после приема болеутоляющих средств или алкоголя).
- Слишком длительное применение может приводить к ожогам кожи.
- Внимание! Ни в коем случае не засыпать, если подушка-валик находится в работе.
- Не используйте подушку-валик на воспаленных, поврежденных или опухших частях тела. В случае сомнений перед использованием следует проконсультироваться с врачом.
- При известных обстоятельствах, исходящие от этой подушки-валика электромагнитные поля могут нарушать работу кардиостимулятора. Однако показатели этих полей находятся в допустимых пределах: напряженность электрического поля: макс. 5000 В/м, напряженность магнитного поля: макс. 80 А/м, величина магнитной индукции: макс. 0,1 миллитесла. Поэтому перед использованием подушки-валика проконсультируйтесь с врачом и изготовителем кардиостимулятора.
- Подушку-валик
 - разрешается подключать только к указанному на приборе напряжению,
 - разрешается эксплуатировать только с указанным на приборе (этикетке) типом выключателя,
 - не эксплуатировать без присмотра,
 - запрещается включать в скрученном или сложенном состоянии,
 - не зажимать,
 - не перегибать под острым углом,
 - не использовать для лечения животных,
 - не использовать во влажном состоянии.
- Электронные узлы в выключателе подушки-валика при использовании вызывают легкий нагрев выключателя. Поэтому во время работы выключатель не должен быть перекрыт или лежать на подушке-валике.
- Не тянуть, не скручивать и не перегибать сетевые кабели.
- Не втыкать в подушку-валик иголки или другие острые предметы.

- Детям запрещается пользоваться этой подушкой-валиком, за исключением случаев, когда выключатель предварительно отрегулирован родителями или воспитателями или когда ребенок достаточным образом проинструктирован о безопасном использовании.
- Во избежание игр с подушкой-валиком дети должны находиться под присмотром.
- Подушку-валик регулярно проверять на наличие признаков износа или повреждений. При обнаружении подобных признаков или повреждения кабелей или в случае неправильного использования подушки-валика перед повторным использованием ее необходимо отправить в сервисную или в торговую организацию.
- Ремонт разрешается выполнять только специалистам или уполномоченной изготовителем ремонтной мастерской, т. к. для ремонта требуются специальные инструменты. Из-за неправильно выполненного ремонта могут возникать серьезные опасности для пользователя.
- При возникновении вопросов по пользованию подушкой-валиком обратитесь в нашу сервисную службу.

2. Использование по назначению

Подушка-валик предназначена для обогрева человеческого тела. Она позволяет универсальное применение:

например, в области спины или шеи, на животе, в качестве подушки под колени или подушки для людей, предпочитающих спать на боку.

Подушка-валик не предназначена для использования в больницах или для коммерческого использования. Запрещается использование для грудных детей и детей младшего возраста, не чувствительных к теплу людей или людей, находящихся в беспомощном состоянии, а также для животных. Во избежание загрязнения или повреждения подушки-валика мы рекомендуем эксплуатировать ее с чехлом. При первом использовании подушка-валик может выделять запах пластмассы, который исчезает через короткое время.

3. Применение

3.1 Техника безопасности

Подушка-валик оснащена ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМОЙ. Электронные сенсоры предотвращают перегрев подушки-валика по всей ее поверхности путем автоматического отключения в случае неисправности. После автоматического отключения подушки-валика защитной системой индикатор температурного режима больше не будет гореть, даже если прибор включен. Учтите, что в целях обеспечения безопасности продолжение эксплуатации подушки-валика после неисправности более не возможно, необходимо обратиться в сервисную службу.

3.2 Ввод в эксплуатацию

Вначале проверьте, соединен ли выключатель с подушкой-валиком посредством штепсельного разъема. Затем вставьте вилку в розетку.

3.3 Выбор температуры

Чтобы подушка-валик быстро прогрелась, настройте ее вначале на максимальную температуру. Позднее, при необходимости, можно выполнить переключение на более низкий температурный режим.

После включения подушки-валика индикатор выбранного температурного режима вначале мигает короткое время, а затем начинает светиться. При длительном использовании подушки-валика мы рекомендуем выбирать самый низкий температурный режим.

3.4 Температурные режимы

Режим: 0 = выключено
1 = минимальная температура
2 = средняя температура
3 = максимальная температура

3.5 Быстрый нагрев

Подушка-валик имеет функцию быстрого нагрева, которая приводит к быстрому нагреву в течение первых 10 минут.



3.6 Автоматическое отключение

Приблизительно через 90 минут подушка-валик автоматически отключается. После этого начинает мигать индикатор температурного режима. Для повторного включения подушки-валика вначале выберите положение «0», а приблизительно через 5 секунд – требуемый температурный режим.




Выключите подушку-валик (положение «0») или вытащите сетевую вилку из розетки, если после отключения через установленный промежуток времени подушка-валик более не используется.

4. Чистка и уход

Перед очисткой подушки-валика обязательно вытаскивайте сетевую вилку из розетки.

Перед стиркой отсоедините вначале штепсельный разъем и, тем самым, выключатель от подушки-валика (см. рисунок).

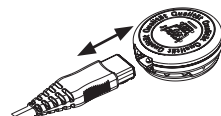

Вначале откройте застежку-молнию на чехле, а затем вытащите подушку-валик. Чистка чехла производится согласно пиктограммам на этикетке.

Небольшие пятна с подушки-валика удаляются тряпкой или влажной губкой, в случае необходимости, с применением небольшого количества жидкого мягкого чистящего средства.

Категорически запрещается использовать чистящие средства, содержащие растворители.

Учтите, что подушку-валик запрещается подвергать химической чистке, машинной сушке, отжимать или гладить утюгом.

На стиральной машине установите режим щадящей стирки при 40°C.

По экологическим причинам мы рекомендуем стирать подушку-грелку вместе с другими текстильными изделиями. Используйте мягкий стиральный порошок, дозируя его согласно инструкциям изготовителя.

Учтите, что слишком частая стирка оказывает серьезное влияние на подушку-валик. Поэтому в течение всего срока службы рекомендуется стирать подушку-валик в стиральной машине не более 10 раз.

Категорически запрещается использовать для закрепления подушки-валика при сушке бельевые прищепки и т. п. и включать ее в целях ускорения высыхания!

Соединяйте выключатель с подушкой-валиком только после того, как штепсельный разъем и подушка-валик полностью высохнут. При укладке подушки-валика в чехол следите за тем, чтобы провод выходил в самом конце застежки-молнии, т. к. иначе ее невозможно будет закрыть.

5. Хранение

Если Вы длительное время не пользуетесь подушкой-валиком, мы рекомендуем хранить ее в оригинальной упаковке в сухом помещении; запрещается класть на нее другие предметы. Дайте подушке-валику вначале охладиться прежде чем помещать ее в упаковку.

6. Утилизация

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



7. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (чехол)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован : эл.грелки, эл.простыни, эл.одеяло – Ростест-Москва
№РОСС DE .АЯ 46.В12082 срок действия с 20.08.2008 по 19.08.2011 г.

Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель : Бойрер Гмбх , Софлингер штрассе 218
89077-УЛМ , Германия для фирмы

Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90



АЯ46

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

