

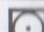




TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék mosható. A megfelelő mosás érdekében ellenőrizze a készülékre varrt címken látható mosási jelzéseket.

 30 Mosás 30°C-on.	 Ne használjon fehérítőt.
 Forgódobos szárítás alacsony hőmérsékleten (40°C alatt).	 Ne vasalja.
 Nem vegytisztítható.	

UTASÍTÁSOK A MOSÁSHOZ

A mosás előtt húzza ki a kapcsoló dugóját (6) a csatlakozó hüvelyből (5). A hálózati csatlakozó eltávolításának megkönnyítése érdekében tolja a csatlakozót gyengéden lefelé.

GÉPI MOSÁS


- A melegítőt moshatja mosógépben 30°C-os normál programon.
- Válasszon kímélő centrifugáló programot. NE használjon kiegészítő centrifugálást.

SZÁRÍTÁS

- Ha szárítógépben szárítja, állítsa a gépet alacsony fokozatra.
- Teregetéskor ne rakjon ruhaszárító csipeszt a készülék elektromos részeire, mert megsérülhetnek.
- NE használja a melegítőt, amíg teljesen meg nem száradt.

HULLADÉKBA HELYEZÉS

 A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. Ezeket környezetbarát módon helyezze hulladékba.

 A nem használt készülék a 2002/96/EK európai uniós irányelv előírásainak megfelelően helyezendő hulladékba. A készülék újrahasznosítható elemei a környezetazennyezés elkerülése érdekében újrahasznosításra kerülnek. Bővebb felvilágosításért forduljon a helyi hulladékhasznosító vállalathoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

SZERVIZ ÉS GARANCIA

Javítások vagy cserealkatrészek beszerzésének szükségessége esetén forduljon az IMETEC ügyfélszolgálatához az alábbi számon vagy a honlapon található információ segítségével. A készülékre a gyártó garanciája érvényes.

További részletek a mellékelt garanciajegyen találhatóak. A jelen használati kezelési és karbantartási útmutatóban foglalt utasítások be nem tartása a gyártói jótállás megszűnését vonja maga után.

IMETEC

www.imetec.com

Tenesta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1000128
0612 (MMYY)



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОГРЕЛКИ

Уважаемый клиент, компания IMETEC благодарит Вас за приобретение данного изделия. Мы уверены, что Вы оцените качество и надёжность данного прибора, так как при его разработке и производстве нашей главной целью было удовлетворение клиента. Настоящее руководство по применению было подготовлено в соответствии с европейским стандартом EN 62079.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



ВНИМАНИЕ! Инструкции и предупреждения для безопасного использования аппарата.



Перед использованием прибора, внимательно прочитайте инструкции по применению, уделите особое внимание предупреждениям по технике безопасности, и выполняйте их. Храните настоящее руководство вместе с иллюстрированной памятной на протяжении всего срока использования прибора для дальнейших консультаций. При передаче прибора третьим лицам, передайте вместе с ним и всю документацию. Если при изучении руководства некоторые места вам не понятны, или у вас возникнут сомнения, прежде чем пользоваться прибором обращайтесь в центр сервисного обслуживания по адресу, указанному на последней странице.


СОДЕРЖАНИЕ

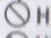
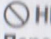
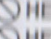

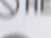

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	стр. 29
ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ	стр. 29
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	стр. 31
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГРЕЛКИ	стр. 31
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ	стр. 31
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ	стр. 31
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ	стр. 31
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	стр. 31
УХОД И ЧИСТКА	стр. 32
ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ	стр. 32
УТИЛИЗАЦИЯ	стр. 32
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ	стр. 32
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПАМЯТКА	стр. I-II
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	стр. III

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ






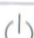
- После распаковки прибора проверьте комплектность поставки в соответствии с рисунком и убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. В случае сомнений, не используйте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Упаковочный материал – не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним! Держите пластиковый пакет вне досягаемости детей; опасность удушья!
- Перед подключением прибора проверьте, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке прибора. Идентификационная табличка находится на корпусе прибора.
- Настоящий прибор предназначен только для домашнего использования в качестве грелки. Любое другое использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.
- Прибор не может быть использован людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или при отсутствии опыта и знаний. В последнем случае, необходимо присутствие лица, ответственного за безопасность, или наличие инструкций, по применению прибора.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- В частности, прибор не должен использоваться немощными людьми, малолетними детьми и людьми с пониженной чувствительностью к теплу.
- Этот прибор не должен использоваться детьми без предварительной регулировки устройства управления родителями или ответственными лицами, или если ребёнок не был надлежащим образом обучен безопасному использованию этих устройств.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – НЕ пригоден для детей с возрастом до 3 лет. Прибор не должен использоваться детьми младше 3 лет, в связи с их неспособностью реагировать при излишнем нагревании.

-  НЕ включайте пульт управления нагревания мокрыми руками.
-  НЕ тяните за шнур питания или прибор, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Перед проведением очистки или ухода, а также в случаях неиспользования прибора, обязательно выньте вилку из электрической розетки.
- В случае поломки или неисправной работы прибора, выключите его и не пытайтесь самостоятельно его чинить. Для ремонта обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.
- В случае повреждения шнура электропитания, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром для предотвращения любых рисков.
- Прибор должен использоваться только с теми типами пультов управления, которые указаны на этикетке прибора.
- Производите частый осмотр прибора, в целях обнаружения следов износа или повреждения. При их наличии, или при неудовлетворительной эксплуатации прибора, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта, не используя больше прибор.
- Прибор не должен использоваться носителями электрокардиостимуляторов.
- Этот прибор не предназначен для использования в медицинских целях в больницах.
-  НЕ используйте электрогрелку, если она влажная.
-  НЕ использовать прибор для обогрева животных.
-  НЕ спать с работающим прибором.
-  НЕ прокалывать иглами или булавками.
- Продолжительное применение с регулировкой на высокую температуру может вызвать ожоги на коже.

ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ

	Класс защиты II.		Запрет.
	Предупреждение.		Переключатель температуры.
	Выключатель ON/OFF.		STAND-BY (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ).

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Дисплей температуры. | 3 Переключатель температуры. | 5 Разъём пульта управления. |
| 2 Дисплей режима ожидания. | 4 Выключатель ON/OFF. | 6 Штекер. |


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГРЕЛКИ

Электрогрелка разработана для обогрева человеческого тела. Она позволяет целенаправленно применять тепло.

Электрогрелка может применяться на следующих частях тела: шейно-плечевой, спинной, пояснично-крестовый и брюшной отделы и сустав, в зависимости от имеющейся у Вас модели.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ИЛИ ОТСОЕДИНЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ


 **ВНИМАНИЕ!** Электрогрелка должна использоваться только с поставляемым вместе с ним пультом управления. Модель пульта соответственно указана на этикетке, пришитой к полотну.

- Подсоедините разъём (5) к штекеру (6) для подключения пульта управления регулировки температуры к электрогрелке.
- Включите вилку в электророзетку.
- Поместите электрогрелку на той части тела, которую хотите прогреть.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

- Включите электрогрелку, нажав на выключатель ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)  (4).
- Дисплей (1) загорится, и температура автоматически установится на позицию 5.
- Нажимая на переключатель температуры  (3), выбрать желаемую температуру в пределах от 1 до 5, выждать пока соответствующий номер не высветится на дисплее температуры (1).

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ






- Электрогрелка оснащена системой автоматического выключения. После 3 часов непрерывной работы загорается дисплей режима ожидания stand-by  (2), указывая на то, что прибор выключился самостоятельно.
- Для того, чтобы снова включить прибор, нажмите на выключатель ON/OFF (4) и выберите снова желаемую температуру.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Выключите электрогрелку, нажав на выключатель ON/OFF (4) по окончании использования.
- Выньте вилку из электророзетки.

УХОД И ЧИСТКА

Электрогрелку можно стирать. Проверьте табличку с условными обозначениями стирки на электрогрелке для правильного выполнения стирки.

 Стирать при температуре 30°C.	 Не отбеливать.
 Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, не превышающей 40°C.	 Не гладить.
 Не подвергать сухой чистке.	

ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ

Вынуть, как всегда вилку из электророзетки и разъединить разъём пульта управления (5) и штекер (6) перед тем, как начинать любую операцию по чистке. Чтобы изъять штекер следует слегка надавить на него.


СТИРКА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

- Электрогрелку можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C, используя обычную программу.
- Использовать программу деликатной стирки только для центрифуги. НЕ производить дополнительного цикла центрифуги.

СУШКА

- Сушить в сушильной машине с заданием низкой температуры.
- Повесить сушиться, не используя прищепки на электрических частях электрогрелки, чтобы не повредить их.
- НЕ пользоваться электрогрелкой до тех пор, пока она полностью не высохнет.

УТИЛИЗАЦИЯ

 Упаковка изделия выполнена из материалов, которые могут подвергаться повторной переработке; удалите ее в соответствии с действующими нормами по защите окружающей среды. Согласно европейскому стандарту 2002/96/ЕС, вышедший из употребления прибор должен подвергаться утилизации надлежащим образом. Для бережного отношения к окружающей среде, материалы, которые могут быть утилизированы, должны быть рекуперированы. За более подробной информацией, обращайтесь в местную организацию по утилизации отходов или к продавцу прибора.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Для выполнения ремонта, или приобретения запчастей, обращайтесь в авторизованный сервисный центр IMETEC по нижеуказанному телефонному номеру, или посетите наш сайт в Интернете. Прибор покрывается гарантией производителя. За более подробной информацией см. прилагаемое гарантийное обязательство. Несоблюдение инструкций, содержащихся в настоящем руководстве по применению, уходу и техобслуживанию изделия, приведет к утрате гарантии.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000128
0612 (MMYY)