

MARTA


МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
Руководство по эксплуатации

MT-2324



ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Четырехпозиционный переключатель режимов
3. Массажные ролики
4. Защитная крышка от брызг
5. Инфракрасная лампа

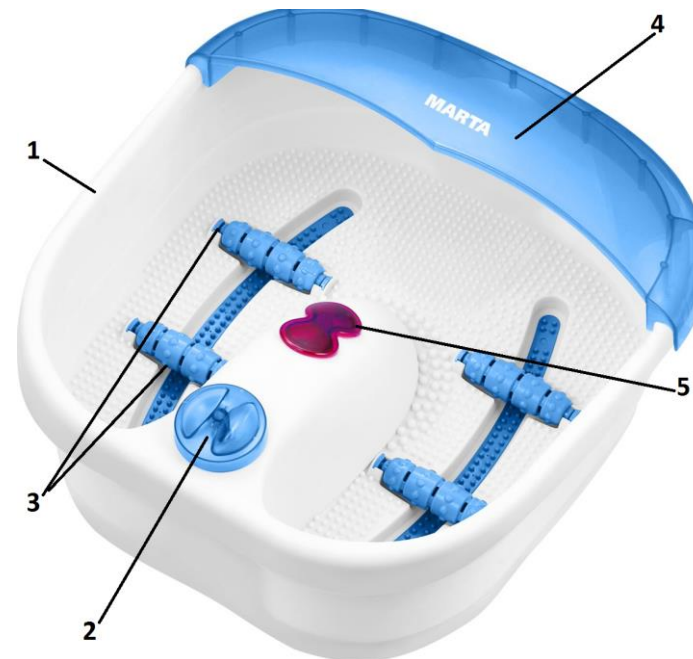

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание данного массажера для ног, указанное в таблице с техническими характеристикам, электропитанию в Вашей локальной сети.

- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Прибор следует использовать согласно инструкции.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если Вы им не пользуетесь, когда наливаете или сливаете воду, а также перед чисткой или перемещением прибора.
- Во избежание поражения электрическим током и пожара, не опускайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к прибору, немедленно отключите его и проверьте в сервисном центре.
- Не пользуйтесь прибором в ванной и рядом с водой.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь прибором после сбоя в его работе, падения с высоты или в воду, а также при повреждении электрошнура или вилки. Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта прибора.
- В случае повреждения электрошнура, обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать, настраивать или заменять детали массажера для ног. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Держите электрошнур подальше от острых краев и горячих поверхностей.
- Не ставьте и не храните прибор там, откуда он может упасть.
- Не тяните за электрошнур, не перекручивайте его и не наматывайте вокруг массажера.
- Не пользуйтесь массажером под одеялом. Чрезмерное нагревание может привести к воспламенению, вызвать электрошок или нанести травму. Не переносите массажер за электрошнур и не используйте электрошнур в качестве ручки.
- Для того чтобы отключить прибор установите переключатели в позицию “Выключено”, затем отсоедините прибор от электросети.
- Никогда не засыпайте во время пользования массажером.
- Не распыляйте вблизи работающего прибора никакие аэрозоли.
- Данный прибор имеет функцию нагрева. Люди, невосприимчивые к нагреванию, должны проявлять особую осторожность при использовании массажера.
- Если у Вас есть какие-то проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь со своим врачом перед тем, как пользоваться массажером.
- Людям с электронным кардиостимулятором необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.
- Беременным женщинам и лицам, страдающим диабетом, перед тем, как пользоваться массажером, необходимо проконсультироваться с врачом.
- Никогда не пользуйтесь массажером и функцией инфракрасного прогревания в области открытой раны, опухоли, ожога, при повреждении и болезненности кожи.
- Если у Вас чувствительная кожа или плохое кровообращение, не пользуйтесь прибором.
- Массаж должен вызывать приятные ощущения. В случае появления боли или ощущения дискомфорта, прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом.
- Если у Вас долгое время сохраняется ощущение боли в мышце или связке, отключите прибор и проконсультируйтесь с врачом. Постоянная боль может быть симптомом серьезного заболевания.
- Никогда не включайте прибор в розетку и не выключайте из нее, если Ваши ноги находятся в воде.
- Удостоверьтесь, что у Вас сухие руки прежде, чем пользоваться переключателем или вынимать вилку из розетки.

- Пользуйтесь массажером только сидя, ничего не кладите в прибор.
- Всегда проверяйте температуру воды прежде, чем опустить в нее ноги.
- Данный массажер не может использоваться для нагревания холодной воды. Наполняйте прибор теплой водой и используйте функцию нагрева только лишь для поддержания необходимой температуры.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться массажером. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не должен использоваться людьми с ограниченными возможностями (умственными и физическими), в том числе детьми, без наблюдения людей, ответственных за их безопасность.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Правильное применение прибора вызывает небольшое усиление кровообращения в коже ног, которое проявляется в приятном устойчивом ощущении тепла (нагревании кожи). Регулярное проведение массажа ног улучшает кровообращение в ступнях и в ногах в целом.
- Встроенный нагревательный элемент поддерживает желаемую температуру во всем массажере.
- Рельефная поверхность на дне ванночки стимулирует биологически активные точки на ступнях Ваших ног. Вы можете легко контролировать эффективность массажа, сильнее или легче надавливая на рельефную поверхность ногами.
- Прибор снабжен 4-мя массажными роликами для глубокого проникающего массажа ступней.
- Функция инфракрасного прогревания предназначена для термотерапии ног.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Перед тем, как наполнить прибор водой, удостоверьтесь, что он не включен в розетку.
- Выберите тип массажа.
 Массаж без воды Прибор может использоваться без воды для массирования ног
 Массаж с водой Для того, чтобы насладиться водным массажем, наполните массажер теплой водой
- Установите массажер на ровную поверхность, и резиновые ножки не позволят ему скользить
- Подключите прибор к электросети и включите его. Установите переключатель в необходимое положение.
 - 0 Выключено
 - 1 Пузырьки
 - 2 Инфракрасное прогревание/ Нагрев
 - 3 Пузырьки/ Инфракрасное прогревание/ Нагрев
- Сядьте и поместите ноги в массажер.

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ВСТАВАТЬ В МАССАЖЕРЕ

- Насладитесь глубоким проникающим массажем, скользя ногами взад и вперед по массажным роликам.

- Используйте функцию инфракрасного прогревания в качестве термотерапии для Ваших ног. Для этого поместите ногу на инфракрасную лампу.
- По окончании массажа, выключите прибор. Выньте ноги из массажера и отключите его от электросети.
- Вылейте воду из прибора. Наклоните массажер, чтобы вода могла стечь.

**НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР В СЕТЬ, ЕСЛИ ВАШИ НОГИ НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ МАССАЖЕРА.**

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети питания и убедитесь в том, что массажер остыл.
- Никогда не допускайте попадания воды или другой жидкости на переключатель режимов.
- Не пользуйтесь абразивными моющими средствами.
- После использования сполосните прибор водой. Никогда не помещайте весь прибор под воду. При желании Вы можете протереть все поверхности влажной тряпочкой с добавлением мягких моющих средств, затем сполоснуть и высушить.

ХРАНИЕ

- Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Выполните рекомендации из раздела «Чистка и уход».
- Уберите прибор в коробку или в прохладное, сухое место.
- Чтобы избежать повреждения электрошнура не наматывайте его на прибор.
- Не подвешивайте прибор за электрошнур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	60 Ватт
Вес нетто / брутто	2,1 кг / 2,4 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	355 мм x 165 мм x 380 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

Ningbo Longfu Electrical Appliances&Tool Co Ltd.

No.32 Changxin RD, Yuyao, Zhejiang, P.R.China

Нинбо Лонгфу Электрикал Эпплайнсиз&Тул Ко Лтд.

Но.32 Чангсин Роуд, Юйао, Джедзянг, Китай

Ningbo Longfu Electrical Appliances&Tool Co Ltd.

Macaotou, Mazhu, Yuyao, Ningbo, China

Нинбо Лонгфу Электрикал Эпплайнсиз&Тул Ко Лтд.

Макауту, Мажу, Юйао, Нинбо,Китай