

**polaris**  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



**PMB 1102**

Гидромассажная ванна для ног  
Bubble foot massager

**Гидромассажная ванна для ног**  
**POLARIS**  
**Модель PMB 1102**  
**Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

На стопах расположено множество точек, связанных с различными органами нашего организма, поэтому массаж стоп полезен для улучшения общего самочувствия. Усиливается кровообращение, активизируются обменные процессы в организме, восстанавливается питание кожи, проходит чувство усталости.

Мы рекомендуем испытать действие этого прибора - в считанные минуты Вы почувствуете прилив свежих сил, не говоря уже о приятных ощущениях, когда тепло разливается по всему телу.

Одновременное воздействие теплой воды и пузырьков воздуха, поступающих в воду под давлением, усиливает лечебный эффект и снятие усталости.

**РЕГУЛЯРНЫЙ 20-МИНУТНЫЙ СЕАНС ВОДНОГО МАССАЖА ДОСТАВИТ ВАМ ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И РЕШИТ ПРОБЛЕМУ БОЛЬНЫХ И УСТАВШИХ НОГ!**

***Особенности массажа:***

- Инфракрасное излучение обеспечивает более эффективный проникающий и нежный массаж Ваших ног. Благодаря высокой температуре воды оно обеспечивает глубокую стимуляцию кожи, кровеносных сосудов; улучшает кровообращение.
- Тысячи пузырьков и поддерживаемая высокая температура воды помогают снять напряжение и тяжесть в мышцах.
- Вращающиеся насадки предназначены для эффективной стимуляции и массажа подошв Ваших ног.

**Оглавление**

Общие указания по безопасности .....	3
Специальные указания по безопасности данного прибора .....	3
Сфера использования .....	4
Описание прибора .....	4
Комплектация .....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и уход .....	5
Технические характеристики .....	5
Информация о сертификации .....	6
Гарантийное обязательство .....	7

## Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## Специальные указания по безопасности данного прибора

- Во время работы массажера его поверхность нагревается. Лиц, чувствительных к теплу, просим пользоваться прибором с особой осторожностью.
- Наполняйте прибор только водой. Не используйте масла, гели или другие жидкости.
- Максимальное время одного сеанса массажа - не более 20 минут.
- Отключайте прибор от сети только сухими руками.
- Используйте только теплую воду для наполнения прибора. Тепло, выделяемое прибором, не предназначено для нагревания воды. Оно только предотвращает её быстрое остывание.

- Не стойте в ножной ванне. Сядьте и поместите ноги в массажёр.
- Выключайте прибор при наполнении водой, освобождении от воды, чистке и хранении.
- Не закрывайте воздушные отверстия. Не допускайте попадание в них пыли и посторонних предметов.


**Ограничения, связанные с состоянием здоровья:**

- Если у Вас имеются сомнения по поводу состояния Вашего здоровья, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Особенно это касается людей с имплантированным кардиостимулятором, диабетиков, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями суставов и мышечной системы. Незатихающие боли могут быть сигналом серьезного заболевания. Проконсультируйтесь у Вашего врача.
- Никогда не применяйте массажер при открытых ранах, не массируйте места с проблемами кровоснабжения, опухоли, ожоги, воспаления или трещины на коже и нагноения.
- Массаж должен действовать расслабляюще и доставлять удовольствие. Если после массажа вы почувствовали боль или недомогание, то обратитесь перед следующей процедурой к врачу за консультацией.

**Сфера использования**

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

**Описание прибора**

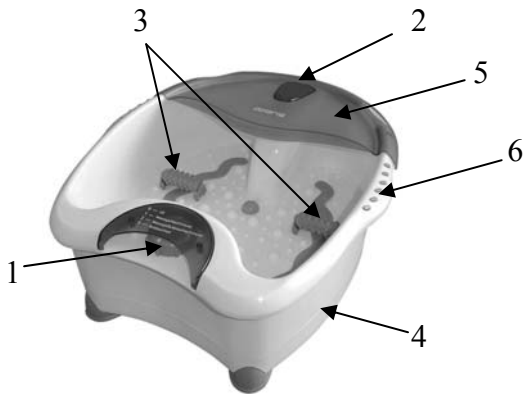

1. Функциональный переключатель
2. Инфракрасная лампа.
3. Роликовые насадки для массажа ступней
4. Ванночка для ног
5. Защитная крышка от брызг
6. Нескользящие ручки

**Функциональный переключатель**

- О – OFF (ВЫКЛ)
- 1 – массаж/тепло/инфракрасное излучение
- 2 – массаж/пузырьки/тепло/инфракрасное излучение
- 3 – пузырьки/тепло

## Комплектация

1. Прибор
2. Инструкция пользователя
3. Список сервисных центров
4. Гарантийный талон

## Подготовка к работе и использование

- Удалите весь упаковочный материал.
- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
- Перед наполнением прибора водой убедитесь в том, что он выключен из сети.
- Поставьте массажер перед собой на пол и наполните его водой. Не наполняйте прибор выше линии максимального заполнения.
- Включите прибор в сеть.
- Сядьте и удобно опустите ноги на массажные ролики (3).
- Установите переключатель (1) в положение, соответствующее выбранному типу массажа:
  - 0 – OFF (ВЫКЛ)
  - 1 – массаж/тепло/инфракрасное излучение
  - 2 – массаж/пузырьки/тепло/инфракрасное излучение
  - 3 – пузырьки/тепло
- Наслаждайтесь глубоким массажем, двигая ступни ног вперед - назад по массажным роликам.
- По окончании отключите прибор, вылейте воду из прибора.

## Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Протрите прибор влажной тряпочкой.
- Вытрите прибор насухо.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

## Технические характеристики

**Модель РМВ 1102** – гидромассажная ванна для ног торговой марки Polaris

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц


Мощность: 110 Вт

Класс защиты - II

***Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.*

## Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

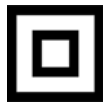

Расчетный срок службы изделия: **3 года**  
Гарантийный срок: **1 год со дня покупки**

### Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"  
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA  
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

## Гарантийное обязательство

Изделие: *Гидромассажная ванна для ног*

Модель: **PMB 1102**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)