

МАССАЖНАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ

МОДЕЛЬ: FM-202



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым приобретением – массажной ванночкой для ног FM-202 Rolsen.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Перед использованием ванночки внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните ее и используйте в дальнейшем в качестве справочного материала. При использовании электроприборов, в целях уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и / или другого вреда, должны выполняться основные меры предосторожности.

1. Перед включением прибора убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе.
2. Используйте данное устройство только по его прямому назначению, как указано в инструкции.
3. Устанавливайте массажную ванночку только на ровную поверхность.
4. Выбирайте такое место установки прибора, чтобы в случае неисправности его можно было немедленно обесточить.
5. Не включайте ванночку без воды.
6. Никогда не используйте прибор вне помещений.
7. Не размещайте ванночку рядом с нагревательными приборами или источниками тепла.
8. Следите за тем, чтобы сетевой провод не соприкасался с острыми или горячими поверхностями.
9. Руки должны быть сухими, когда вы прикасаетесь к прибору или сетевой вилке.
10. Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, если ступни ног находятся в воде.
11. Никогда не опускайте корпус прибора в воду или в другие жидкости. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других емкостей, наполненных водой.
12. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической сети.
13. Обязательно отключайте прибор от электрической сети, если он не используется, а также при его наполнении водой, сливе воды, чистке или перемещении.
14. Нельзя вставать в ванночке, используйте ее только в сидячем положении.
15. При эксплуатации не накрывайте ванночку пледом, одеялом и т.п.

16. Не используйте прибор, если вы находитесь в сонном состоянии.
17. Если вам необходимо уйти (даже на короткое время), всегда отключайте прибор от электрической сети.
18. Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
19. Храните прибор в недоступном для детей месте.
20. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
21. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой сетевого шнура, а также при возникновении сбоев в работе или после падения. Ремонт прибора должен проводиться только в авторизованном сервисном центре.
22. Используйте только водопроводную воду.
23. Уровень воды не должен превышать отметку «MAX».
24. Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
25. Массажная ванночка предназначена только для бытового использования.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ


При появлении болей или в случае, если пользование ванной для ног воспринимается как неприятное воздействие, немедленно прекратить пользование ванной. Лицам, не чувствительным к тепловому воздействию, рекомендуется во избежание ожогов проверять температуру воды термометром перед наполнением ванны.

В случае проблем со здоровьем, а также

- при беременности;
 - при заболеваниях, сопровождающихся лихорадочным состоянием;
 - при тяжелых случаях диабета;
 - при кожных болезнях или повреждениях кожи, прежде всего открытых ранах;
 - при воспалениях стоп и голеней;
 - при заболеваниях вен, тромбозах или варикозном расширении вен;
 - при ушибах или болях в стопах, ногах или суставах;
 - при туберкулезе или онкологических заболеваниях;
- не пользоваться прибором без консультации врача.

ОПИСАНИЕ

- A** – Переключатель режимов работы
- B** – Кожух для защиты от брызг
- C** – Инфракрасная лампа
- D** – 4 массажных ролика
- E** – Текстурированное покрытие дна ванночки
- F** – Корпус

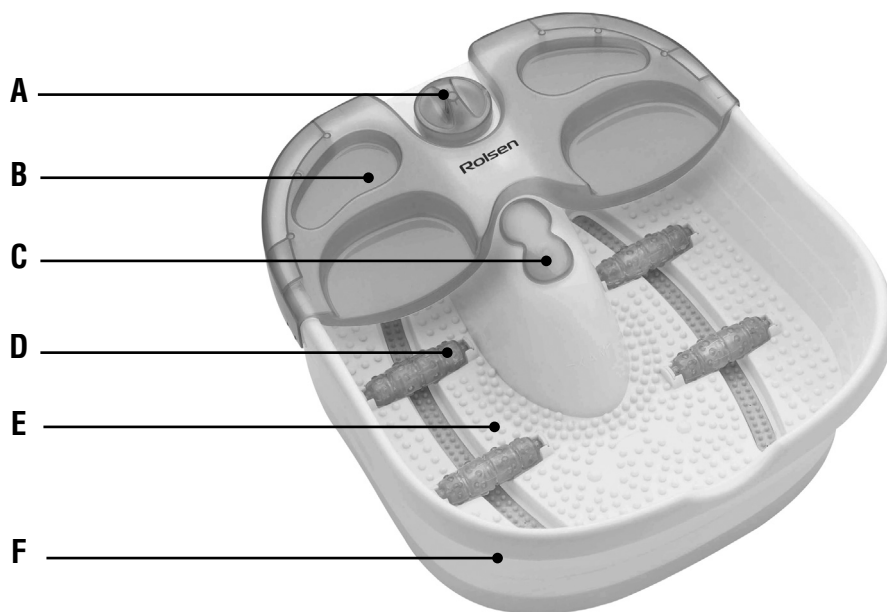

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАННОЧКИ

Регулярное использование ванночки для ног существенно улучшит циркуляцию крови в сосудах ног. Встроенный нагревательный элемент поддерживает температуру воды во время сеанса массажа, а массажные насадки, контактируя с подошвами ног, обеспечат вам эффективный и приятный массаж. Вы можете контролировать силу массажа, прижимая стопы или ослабляя давление на массажную поверхность; из отверстий для воздуха во время массажа выходит множество воздушных пузырьков, которые обеспечивают расслабляющий эффект. Обычный сеанс массажа не должен длиться дольше 15-20 минут. Во избежание перегрева отключайте массажер, чтобы он остыл.

Массажер оснащен функцией вибромассажа, которая включается автоматически при установке всех режимов работы.

Правила пользования

- Убедитесь, что прибор не подключен к сети (переключатель режимов находится в положении **0**).
- Поставьте ванночку на пол, наполните теплой водой до отметки максимального уровня.
- Включите в сеть.
- Сядьте на стул и опустите ноги в воду (в ванночке нельзя вставать).
- Выберите нужный режим работы.

Внимание! Нельзя включать или отключать прибор от сети, если ноги находятся в воде.

Режимы работы

- *Выключен / 0*
- *Вибромассаж + Инфракрасное излучение*
Установите переключатель режимов в положение (1). В данном режиме возможен вибрационный массаж и инфракрасное излучение. Источник инфракрасного излучения, проникает глубоко в ткани, способствуя улучшению кровообращения, открытию пор, а так же стимулирует метаболические процессы в организме.
- *Вибромассаж + Пузырьковый гидромассаж + Инфракрасный прогрев в теплой воде*
Установите переключатель режимов в положение (2). Массаж инфракрасным нагревом приносит облегчение при болях в мышцах и способствует регенерации кожи. Также в этом режиме работает вибрационный и пузырьковый массаж. Встроенный нагревательный элемент будет поддерживать воду теплой.
- *Пузырьковый гидромассаж + Поддержание температуры воды*
Если необходим массаж в теплой воде и пузырьковая ванна, налейте в массажную ванну теплую воду и установите переключатель в положение (3).

Внимание! Ванночка не нагревает холодную воду, а только поддерживает температуру налитой теплой воды. Время работы ванночки не должно превышать 20 минут. После использования отключите ванночку и дайте ей остыть.

ЧИСТКА

Внимание! Опасность поражения током!

1. При чистке прибор должен быть всегда отсоединен от сети. Ни в коем случае не погружать прибор в воду. Не пользоваться устройствами паровой чистки.
2. Не применяйте абразивные чистящие средства и растворители.
3. Промойте массажер, не погружая его полностью в воду.
4. При необходимости протрите все части мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, промойте и высушите.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство, необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки электросети.
- Храните прибор в коробке или в чистом и сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FM-202
Напряжение питания	220-240 В
Частота сети	~50/60Гц
Максимальная мощность	90 Вт

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер

AА**

месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения провода питания его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

1. Механических и тепловых повреждениях устройства и провода питания.
2. Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
3. Наличии следов самостоятельной разборки прибора

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: NINGBO NETD BENEFIT IMP.&EXP. CO., LTD, Китай, ADD.: NO. 6-206#, BUILDING NO.2, EAST OF XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG PROVINCE

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11314 от 13.11.2010



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen