

Уход за аппаратом

После каждой процедуры следует очищать рукоятку модуля аппарата и насадки. Перед обслуживанием насадок их следует отсоединять от рукоятки модуля.

Не рекомендуется использовать едкие моющие средства для очищения модуля аппарата и насадок.

После выполнения процедуры промойте насадки в теплой воде (50 ° C) с добавлением мыла.

Рекомендуется тщательно просушивать насадки-щеточки после их очищения.

Во избежание повреждения щеток не храните их щетиной вниз.

После каждой процедуры протирайте рукоятку модуля аппарата с помощью мягкой салфетки, смоченной в мыльной воде.

! Важно! Извлекайте батареи питания из аппарата, если аппарат не будет использоваться длительное время (1 месяц и более).


Технические характеристики

Габариты: 196*147*50 мм

Питание: 4 батареи 1.5 В размера AA (не входят в комплект)

Комплектация:

1. SPA-массажер «Face & Body Cleaner» Gezatone, модель AMG 107 - 1 шт.
2. Большая насадка-щеточка - 1 шт.
3. Малая насадка-щеточка - 1 шт.
4. Насадка-губка - 1 шт.
5. Насадка из пемзы - 1 шт.

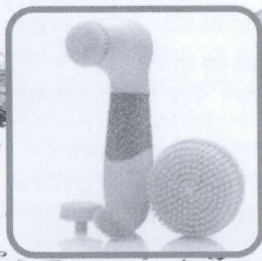

Инструкция по эксплуатации

RVS.AMG107.160311

Инструкция по эксплуатации

Face & Body Cleaner

SPA-МАССАЖЕР для ухода за лицом и телом
с 4-мя насадками серии AMG, модель AMG 107

GÉZAtone



model AMG107

Введение

Молодая, гладкая, упругая, ухоженная и чистая кожа – мечта каждой женщины. Однако, с возрастом, в условиях общего загрязнения окружающей среды, при постоянных стрессах, кожа теряет упругость и свежесть, ухудшается цвет лица.

Используя SPA-массажер для глубокого очищения «Face & Body Cleaner» Gezatone, модель AMG 107 можно эффективно удалить загрязнения и ороговевший слой клеток, очистить поры и вернуть коже свежий и сияющий вид.

SPA-массажер «Face & Body Cleaner» Gezatone, модель AMG 107 предназначен для глубокого и тщательного очищения кожи лица и тела.

Вращающиеся насадки-щеточки разной жесткости тщательно очищают кожу, стимулируя кровообращение и восстановительные процессы, одновременно повышая тонус кожи.

SPA-массажер обладает водонепроницаемостью, чтобы спокойно перенести случайный и незначительный контакт с жидкостью (брызги, дождь), но не предназначен для погружения в воду или использования под душем.

Для более эффективного очищения кожи вместе со SPA-массажером «Face & Body Cleaner» Gezatone, модель AMG 107 рекомендуется использовать специальные очищающие средства согласно Вашему типу кожи (например, скрабы, эмульсии или очищающие гели).

Подобное сочетание позволяет добиться от процедуры максимального эффекта.

Очищение кожи лица при помощи насадок-щеточек является прекрасным способом подготовить кожу для нанесения сывороток, масок и других косметических процедур.

Очищение кожи тела – подготовка к нанесению крема, масла, обертывания или к процедуре массажа.


При помощи SPA-массажера «Face & Body Cleaner» Gezatone, модель AMG 107 Вы можете быстро обработать участки тела с огрубевшей кожей: пятки, стопы, колени и локти. Специальная насадка-пемза справится с проблемой гиперкератоза за 1 процедуру.

1

Комплектация




Кнопка включения-выключения массажера («I» / «O»)

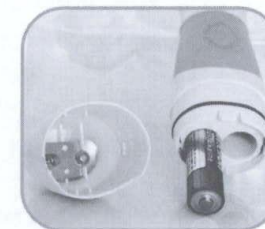


Установка батарей питания 1.5 В размера AA (не входит в комплект)




Большая насадка-щетка
(рекомендуется для тела).

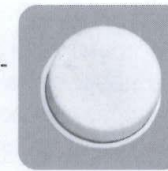

Насадка-губка
(рекомендуется для выполнения демакияжа или очень деликатного пилинга с использованием мягкого скраба).

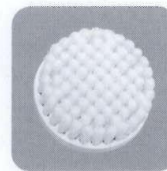

Малая насадка-щетка
(рекомендуется для лица, шеи и зоны декольте).

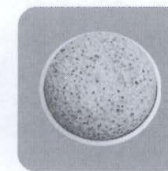

Насадка из пемзы
(рекомендуется для обработки участков с гиперкератозом: пятки, стопы, колени, локти).

2

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием аппарата и сохраните ее для возможного дальнейшего использования.

- Если вы проходите курс лечения у дерматолога, проконсультируйтесь с врачом перед использованием аппарата.
- Для большей эффективности процедур рекомендуется использовать подходящие вашему типу кожи косметические средства.
- Перед выполнением процедур с использованием аппарата рекомендуется выполнить тест на переносимость на внутренней стороне предплечья. Некоторые косметические средства в сочетании с аппаратом могут стать причиной раздражения кожи.
- Использование некоторых косметических средств может повлиять на изменение цвета щетины насадки-щеточки. Изменение цвета щетины не снижает эффективность выполнения процедур.
- Всегда используйте только оригинальные насадки, поставляемые производителем.
- Храните аппарат в местах, недоступных детям.
- Используйте аппарат строго по его прямому назначению, следуя рекомендациям, изложенным в данном руководстве пользователя.

⚠ Не рекомендуется выполнять процедуры в следующих случаях: аллергические реакции кожи

- солнечные ожоги
- нарушение целостности кожных покровов
- сразу же после выполнения химического пилинга
- после процедур микродермабразии
- прием медицинских препаратов, повышающих чувствительность кожи
- недавно перенесенная пластическая операция
- акне, инфекционные и кожные заболевания

Если у вас имеется хотя бы одно из вышеперечисленных заболеваний, перед выполнением процедур проконсультируйтесь с врачом. По гигиеническим соображениям не рекомендуется передавать аппарат другим лицам.

Подготовка аппарата к выполнению процедуры

Установка батарей питания



⚠ Важно! Производите замену батареек только сухими руками.

Аппарат работает от 4 батарей питания типа AA.

Для продления срока эксплуатации рекомендуется использовать щелочные батарейки.

1. Откройте батарейный отсек, потянув нижнюю часть рукоятки модуля вниз.
2. Установите новые батареи питания в батарейный отсек, соблюдая полярность.
3. Закройте батарейный отсек.

⚠ Важно!

1. При установке батарей питания всегда соблюдайте полярность.
2. Всегда используйте батареи одного производителя.
3. Не рекомендуется устанавливать новую батарею питания вместе со старой.
4. Всегда своевременно производите замену батарей питания.
5. Производите утилизацию батарей питания в соответствии с нормами утилизации, действующими в вашей стране.
6. Не погружайте аппарат в воду.
7. Всегда выключайте аппарат по завершению выполнения процедуры.
8. Извлекайте батареи питания из аппарата, если аппарат не будет использоваться длительное время (1 месяц и более).

Описание насадок

Выполнение процедур

1. Уберите волосы с помощью ободка или повязки.
2. Вставьте соответствующую насадку в рукоятку модуля брашинга.
3. Включите аппарат нажатием кнопки «I».
Начните выполнение процедуры.
4. По завершении процедуры выключите аппарат нажатием кнопки «0».



Малая насадка-щетка

Щетина малой насадки-щеточки очень мягкая и идеально подходит для деликатной очистки и пилинга кожи лица, шеи и декольте.

Перед процедурой рекомендуется наложить на кожу лица теплый компресс или провести вапоризацию (распарить кожу). Затем кожу необходимо промокнуть салфеткой и нанести скраб, гель или эмульсию согласно Вашему типу кожи.



Перед выполнением процедуры смочите щетину насадки – щетки теплой водой, нанесите на насадку-щетку небольшое количество косметического средства.

Начните выполнение процедуры с области лба, по массажным линиям лица и шеи легкими, плавными круговыми движениями, двигаясь «от центра к периферии». Насадка-щеточка должна плотно соприкасаться с поверхностью кожи. Никогда не надавливайте насадками на кожу во время выполнения процедуры. Движения насадки всегда должны быть легкими и деликатными, чтобы не вызвать раздражение кожи. После выполнения процедуры очистки кожи проведите процедуру массажа или нанесите маску, подходящую вашему типу кожи. Регулярные процедуры позволяют улучшить микроциркуляцию, улучшить проникновение косметических препаратов, повысить эластичность и упругость кожи, уменьшить глубину морщин, избавиться от «черных точек», Ваше лицо будет светиться молодостью и красотой.

Описание насадок



Большая насадка-щеточка рекомендуется для выполнения процедур по телу.

Перед выполнением процедуры смочите щетину насадки – щетки теплой водой, нанесите на насадку-щетку небольшое количество косметического средства.

Выполните процедуру круговыми движениями по массажным линиям. Движения насадки всегда должны быть легкими и деликатными, чтобы не вызвать раздражение кожи.

После выполнения процедуры очистки кожи проведите процедуру массажа или нанесите обертывание, сыворотку или крем.



Насадка-спонж используется для демакияжа и деликатного очищения чувствительной и гиперчувствительной кожи.

При помощи насадки-спонжа можно выполнять процедуру деликатного массажа кожи лица.

Для большей эффективности рекомендуется выполнять массаж после глубокой очистки кожи. Предварительно рекомендуется нанести на спонж небольшое количество питательного косметического средства. Выполните массаж по массажным линиям лица и шеи легкими плавными круговыми движениями.




Насадка из пемзы используется для тщательного очищения участков тела с огрубевшей кожей: пятки, стопы, колени, локти.

Перед выполнением процедуры рекомендуется подготовить кожу, сделав теплую ванночку для ног или приняв душ/ванну.

Вставьте насадку из пемзы в рукоятку модуля аппарата.

Начните процедуру очищения, выполняя массаж обрабатываемого участка круговыми движениями.

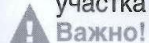

Важно!

Для большей эффективности процедур и предотвращения раздражения кожи рекомендуется производить замену насадок-щеток каждые 2-3 месяца.