

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TAKASIMA

Представитель ООО «Корда» по России
190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, 9

Телефон: +7 (812) 363-43-33
E-mail: office@korda.spb.ru


www.takasima.ru

ИНФРАКРАСНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП ТК-201


Вибрационный массаж для здоровья и красоты

Подключение


1. Удалите из базы 7 шурупов.

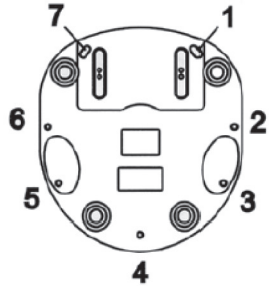

2. Откройте верхнюю крышку под углом 60° и достаньте кабель (главную шину).

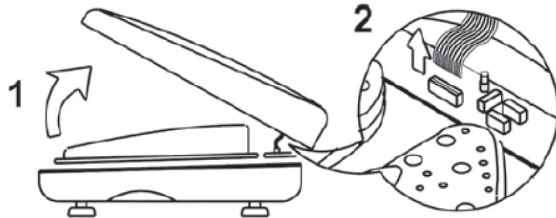


3. Открутите 8 гаек с помощью ключа или плоскогубцев.

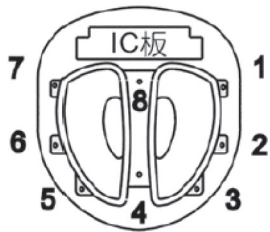

4. Снимите кожу и замените инфракрасную трубку (в комплекте с массажером поставляются 2 трубки).
5. После замены трубки, закрепите гайки, кабель и болты. Недостаточная фиксация этих деталей может привести к повреждению массажера.

Для защиты оборудования от перепадов напряжения, рекомендуется подключать прибор через сетевой фильтр.

Проекция внутренних органов

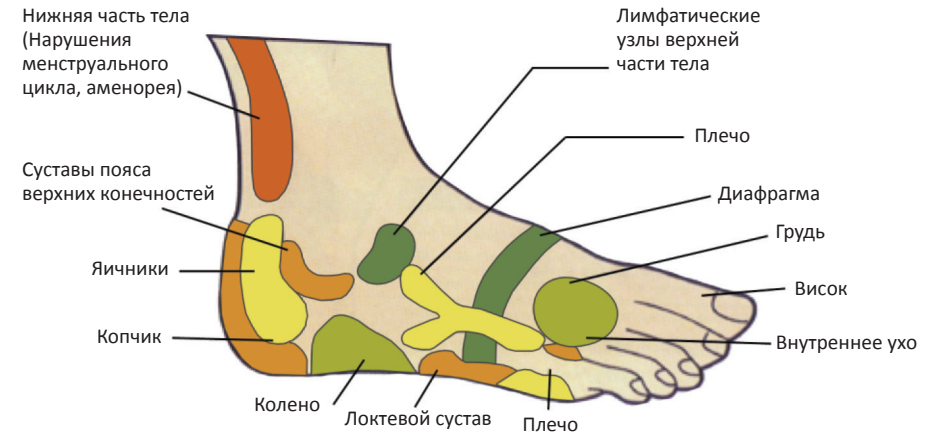

Спецификация

Размер, см.	Разложенный: 38 Ч 38 Ч 20
Вес, кг.	3 нетто, 3,5 брутто
Напряжение	110V/60Hz, 220-240V/50Hz, 60Hz
Потребляемая мощность,	W 48

Проблемы с пищеварением

Заболевания пищеварительного тракта чаще всего связаны с неправильной циркуляцией желчи. При воздействии инфракрасным излучателем в области спины циркуляция желчи в организме нормализуется.

Снятие нервного напряжения

Согласно последним медицинским исследованиям, 75% случаев заболеваний связано с психосоматическими расстройствами. Инфракрасное излучение и массажный механизм позволяют расслабиться, избавиться от нервного напряжения и усталости. При этом снимаются такие симптомы, как головная боль и боль в плечах.

Усталость

Инфракрасные лучи добавляют организму жизненных сил и снимают усталость. При этом они нейтрализуют такие симптомы, как головная, мышечная боль и боль в плечах.


Проекция внутренних органов



Функции

1. Две программы вибрационного массажа (медленный и быстрый).
2. Автоматическая программа вибрационного массажа (15 мин).
3. Инфракрасный излучатель, стимулирующий акупунктурные точки на подошве ступни.
4. Автоустановка времени массажа на 30 мин.
5. Массаж и прогревание ног, ступней, талии, ладоней, спины и бедер.
6. Автоматический контроль безопасной температуры.


Диаграмма частоты вибрации

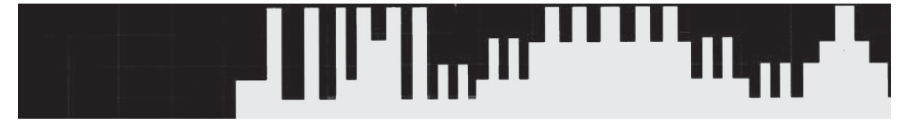

- Автоматическая программа вибрации в быстром, медленном, сильном и слабом режимах усиливает насыщение крови кислородом и обеспечивает его нормальную циркуляцию в организме.
- Массируются 30 акупунктурных точек стопы.

Инструкции по эксплуатации

1. Прежде чем включить массажер в сеть постоянного тока, пожалуйста, убедитесь в том, что операционное напряжение соответствует Вашей электрической сети. После подключения вилки в розетку и нажатия кнопки питания, должна загореться подсветка подставки для ног, идентифицирующая готовность к работе. При выключении питания подсветка гаснет.
2. Вы можете выбирать функции массажа и инфракрасного излучения по отдельности либо синхронно.
3. Вибрационный массаж доступен в трех режимах (автоматический, быстрый и медленный)
4. Для инфракрасного излучения доступны три режима интенсивности: сильное, среднее и слабое).
5. В случае перегрева температура массажера автоматически снижается до нормальной.

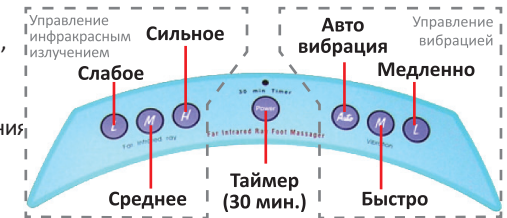

Стимуляция сосудистой системы

Массажер способствует обновлению кровеносных сосудов, удалению шлаков и положительно влияет на функцию дыхания.



Красивая кожа

Массажер повышает эластичность капиллярных сосудов и прочищает сальные железы, предотвращая тем самым жировую мышечную атрофию.



Воздействие на нервную систему

Повышается проводимость нервных окончаний. Устраняются различные расстройства центральной нервной системы. Например, бессонница.



Высокочастотный вибрационный массаж, улучшающий циркуляцию крови

Высокочастотный вибрационный массаж помогает прочистить кровеносные сосуды и восстановить циркуляцию крови. При недостаточной интенсивности кровообращения и пониженном обмене веществ человек может испытывать усталость, заторможенность, простудные симптомы и даже боли. Особенно это проявляется при чрезмерной нагрузке на работе. Функция интеллектуального вибрационного массажа помогает устранить усталость и болезненность в мышцах. Высокочастотная вибрация улучшает циркуляцию крови и лимфы в организме.



Вибрационный массаж для здоровья и красоты

Нарушения кровообращения и замедленный обмен веществ – одна из главных причин многих заболеваний. Избыточное питание также может привести к повышению холестерина, ожирению, уремии, сосудистым заболеваниям.

За счет высокочастотной вибрации массажер нормализует циркуляцию крови, улучшает обмен веществ, выводит из организма шлаки и вредные вещества. С помощью массажера можно максимально комфортно массировать не только ноги, но и любые другие части тела.

Инфракрасное излучение прогревает тело и дарит дополнительную энергию.



Регуляция давления крови

Использование инфракрасного излучателя совместно с вибрационным массажем позволяет нормализовать давление крови. Температура инфракрасных лучей колеблется в пределах от 40 до 50°C, при этом возможно частое использование массажера при нарушении давления. Однако больные с повышенным давлением перед использованием массажера должны проконсультироваться у лечащего врача.

Нарушения кровеносной системы могут привести к таким серьезным заболеваниям, как инсульт и паралич. Прогревание инфракрасными лучами шеи и спины в сочетании с массажем стоп помогает предотвратить нарушения давления.