


# TOUCHBeauty

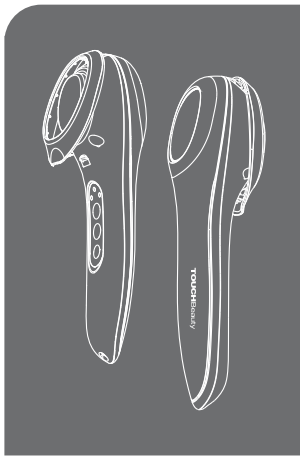


ПРИБОР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

AS-1385

INSTRUCTION MANUAL

## УСТРОЙСТВО:

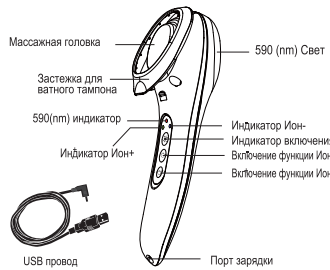

Прибор для омоложения кожи сочетает в себе три технологии: Гальванический ток + фототерапия + Вибрация. Предназначен для более эффективного проникновения в поры кожи питательных косметических продуктов по уходу за кожей!

## ОСОБЕННОСТИ:

- Объединяет три технологии в одном устройстве, глубоко очищает кожу, усиливает эффект косметических кремов, и поддерживает молодость вашей кожи.
  - Устраняет загрязнения:** Ионный акустический массаж Ion + мягкими колебаниями устранит загрязнения в порах и обеспечит длительное поддержание хорошего состояния кожи.
  - Усиливает поглощение питательных веществ:** При совместном использовании с косметическими кремами по уходу за кожей ионный акустический массаж Ion + мягкими колебаниями усиливает проникновение питательных веществ, действуя глубоко в порах, кожа полезные вещества максимально защищают и питают вашу кожу.
  - Фототерапия:** Оранжевый свет (590 nm): Активирует клетки, обновляет коллаген и задерживает старение кожи.
- Два режима (непрерывный / прерывистый) для различного использования.

- Две настройки автоотключения: 5 минут для гальванического тока и мягкой вибрации, и 10 минут для фототерапии.
- Подходит для всех типов кожи.
- USB аккумуляторная.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Прибор подходит для всех типов кожи.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Как зарядить устройство:**
  - Необходимо 4 часа, чтобы полностью зарядить устройство. Прибор может непрерывно работать в течение 2 часов после полной зарядки.
  - Подключите кабель USB к порту USB на устройстве и подключите его к компьютеру.
  - Индикатор станет красным во время зарядки и синим, когда прибор полностью зарядится.

## Как пользоваться:



Для выбора необходимой программы: Ion - / Ion + / фототерапия нажмите соответствующую кнопку. Нажмите переключатель еще раз, чтобы изменить режим работы от непрерывного до прерывистой терапии. Нажмите переключатель в третий раз, чтобы выключить устройство, или подождите, пока прибор не отключится автоматически.

## Шаги ежедневного использования:

- Шаг 1: Ионный массаж удаляет загрязнения, глубокая очистка: Прикрепите ватный диск на массажную головку, закрепите застежку. Нанести лосьон на ватный диск и выберите соответствующую программу. Нажмите Ion + переключения. Держите прибор за ручку. Прикоснитесь массажной головкой к коже и массируйте в течение 5 минут обе щеки, снизу вверх, для более глубокого пилинга.

- Шаг 2: Ионный массажер доставляет питательные элементы для более глубокого поглощения: Примените питательные косметические средства по уходу за кожей равномерно на вашем лице. Нажмите переключатель Ion - . Прикоснитесь массажной головкой к лицу и массируйте в течение 5 минут круговыми движениями снизу вверх, для обеспечения лучшего поглощения питательных веществ.
- Шаг 3: фототерапия: Нажмите переключатель света, чтобы начать процедуру фототерапии. Держите устройство на расстоянии 10 мм от поверхности кожи. Перемещайте свет обратно и вперед в течение 10 минут. Рекомендации по использованию - два-три раза в неделю и результаты будут заметны после 3 месяцев непрерывного использования. Используйте перед сном.

## Как чистить:

- Протрите массажную головку и основной корпус прибора мягкой тканью после каждого использования.
- Не мойте под водой.



## ВНИМАНИЕ:

- Держите прибор за ручку с серебристой отделкой при использовании аппарата для ионных функций.
- Не следует использовать этот прибор беременным женщинам и людям с ожогами или тяжелыми заболеваниями акне.
- Основная часть устройства не является водонепроницаемой и не должна погружаться в воду.
- Хранить вдали от влаги и высокой температуры.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- НЕ разбирайте машину, если вы не профессионал.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Прибор не заряжен	Зарядите прибор полностью
Прибор не работает	Низкий уровень зарядки	Зарядите прибор полностью
Эффект не очевиден	Недостаточное время использования	Следуйте инструкции

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

## СОВЕТЫ:

- Чистка лица и массаж
- Ion<sup>-</sup>: после основного очищения лица с очищенной водой или пьюсьном сделайте массаж щек, T-зоны и подбородка в течение 20 сек каждый.
  - Ion<sup>+</sup>: добавьте тоник/крем/сыворотку/масло и массируйте лицо в течение 5 мин для создания условия максимального проникновения питательных веществ.

ПРИБОР ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ  
 Модель: AS-1385  
 Material: ABS, Stainless steel  
 Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.  
 Add: 7/F, Building A, Marine Bay Center, No. 2021, HaiXiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-1385-003

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	300*100mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑单面	型号	AS-1385	日期	2013-11-15
其它	风琴5折后50*100mm (成品)		单位 毫米	设计	周苏辉