




b•Queen

US•MEDICA

THERAPY GOLD

LED LIGHT TREATMENT DEVICE  
ПРИБОР ДЛЯ LED-ФОТОТЕРАПИИ

www.darconval.biz

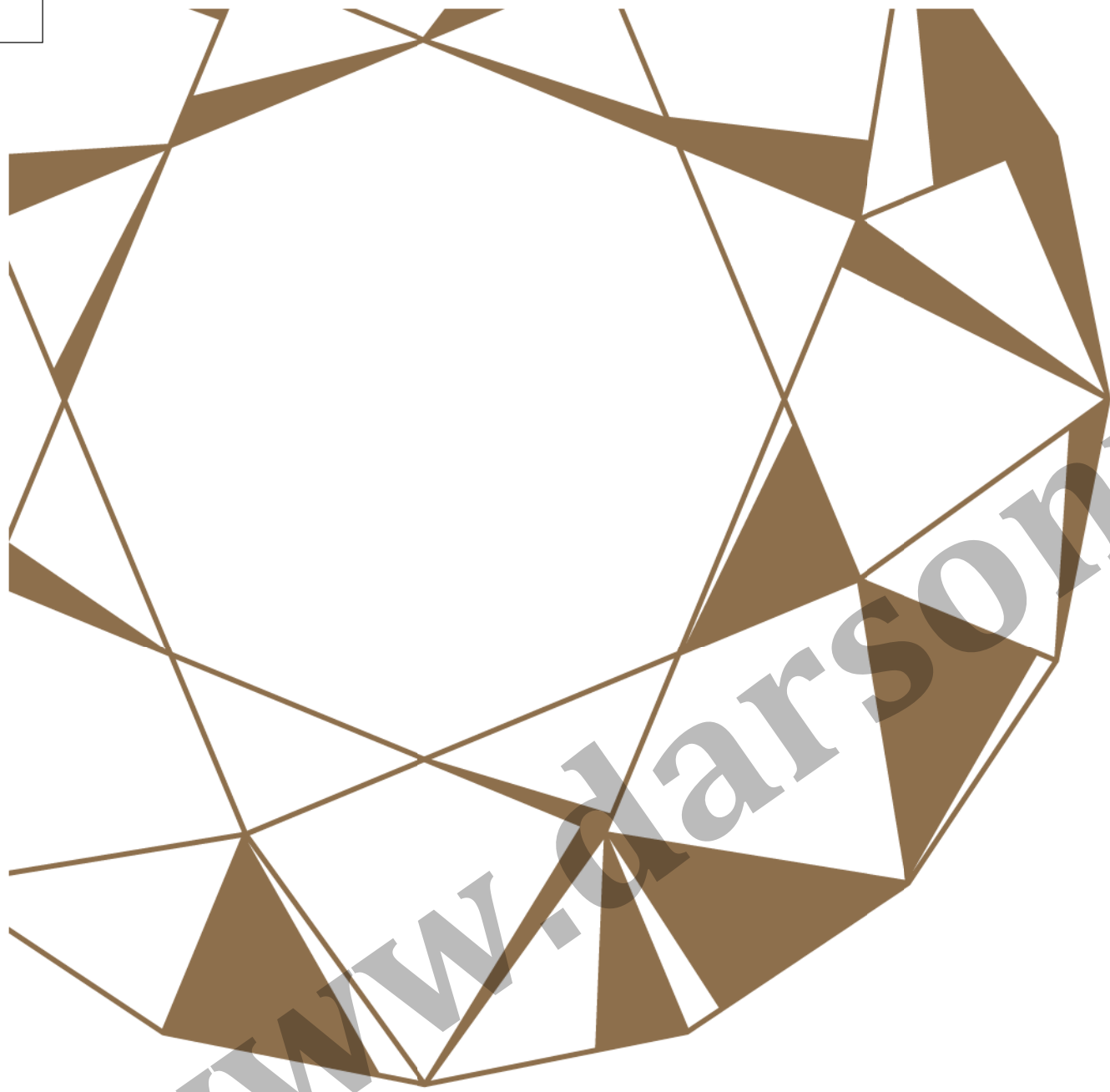

[www.darsonval.biz](http://www.darsonval.biz)

Фототерапия — инновационный, нетравматичный и невероятно эффективный метод омоложения кожи, состоящий в том, что пациент подвергается воздействию света с определёнными длинами волн. В комплекте с прибором идут 3 взаимозаменяемые насадки (золотая, красная и синяя).

Синий спектр (синяя насадка) с длиной волны 415 нм (нанометров) наиболее приближен к ультрафиолетовому излучению и оптимально подходит для жирной, проблемной, пористой кожи с наличием воспалительных процессов, комедонов и угревой сыпи. Синее излучение нормализует выработку сального секрета, уменьшает диаметр пор, восстанавливает процессы самоочищения кожи, дезинфицирует.

Зелёный спектр (золотая насадка) с длиной волны 525 нм применяется для кожи, склонной к сильной пигментации, поврежденной в результате солнечных ожогов, а также при наличии возрастных пятен.

Зелёное излучение активизирует работу клеток кожи, способствует насыщению кожи кислородом, улучшает циркуляцию крови, а также снимает раздражение, красноту, избавляет от пигментации.

Красный спектр (красная насадка) с длиной волны 660 нм разработан для стимуляции деятельности фибробластов клеток, вырабатывающих собственный коллаген и эластин.

Проникновение красного излучения приводит к укреплению стенок сосудов, восстановлению её гладкости, эластичности и упругости, уменьшению морщин. Световое излучение красного цвета подходит для всех типов кожи и идеально сочетается с любыми омолаживающими процедурами.


Во время работы прибора вы заметите, что некоторые из лампочек не горят. Это нормальное явление, т. к. инфракрасное излучение невидимо для человеческого глаза.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Три сменные насадки:

- Красный спектр — действие против морщин;
- Синий спектр — действие против угрей и воспалений;
- Зелёный спектр — действие против пигментации и солнечных ожогов.

2. Два режима работы: пульсирующее и постоянное воздействие.

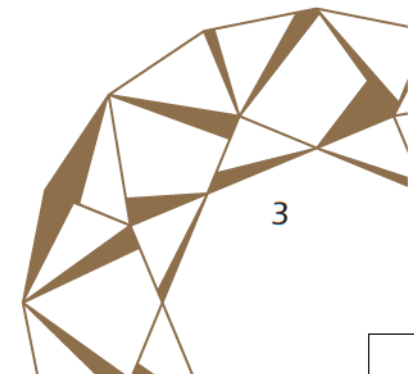

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохранность и эффективное использование прибора возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться прибором без присмотра со стороны.
- Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Ни в коем случае не включайте в сеть прибор при видимых повреждениях шнура или вилки!
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен и запутан, а также не был натянут и не перегибался во избежание повреждения или возгорания.
- Запрещено касаться шнура питания или вилки влажными руками!
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т. д.) немедленно прекратите его использование!
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Не применяйте прибор на поверхности с открытыми ранами.
- Если вы проходите лечение у дерматолога, проконсультируйтесь с ним перед использованием прибора.
- Не используйте устройство совместно с прогревающими мазями.


### **Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:**

- Заболевания щитовидной железы;
- Рак кожи;
- Беременность;
- Гиперчувствительность к световым излучениям;
- Открытые раны.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Прибор × 1  
Насадка × 3  
Защитные очки × 1  
Шнур питания с адаптером × 1  
Руководство пользователя × 1  
Упаковочная коробка\* × 1

\* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

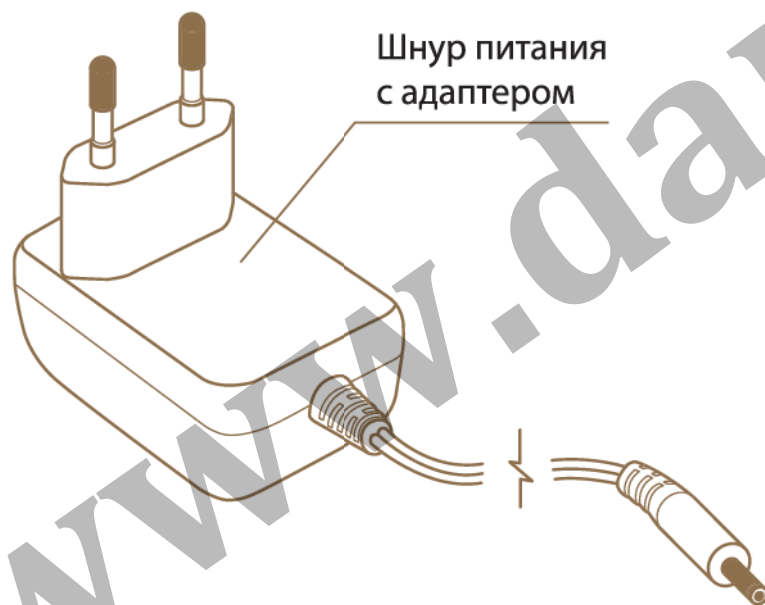

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Насадка


Разблокировка насадки

Кнопка включения  
Power

Кнопка выбора режимов  
Mode

Корпус

Разъём для шнура питания

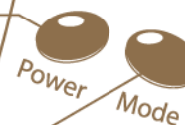

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для наилучшего эффекта мы рекомендуем использовать прибор ежедневно в течение 8 недель.

Длительность процедуры — 24 минуты:

9 минут — режим пульсирующего воздействия;

15 минут — режим непрерывного воздействия.

**Внимание!** Не смотрите на прибор во время процедуры, т.к. свет от него очень яркий. Закрывайте глаза во время работы прибора. Если ваши глаза очень чувствительны, мы рекомендуем надевать защитные очки.

- Перед использованием прибора удалите макияж, тщательно очистите лицо и шею и вытрите их полотенцем.

**Внимание!** Вы можете использовать увлажняющие или антивозрастные крема и гели совместно с красной или золотой насадкой. Не используйте крема, содержащие витамин А (он может блокировать излучение).

- Выберите подходящую вам насадку и установите её, сначала зафиксировав верхнюю часть, а затем аккуратно надавив на нижнюю (до «щелчка»).




- Подключите шнур питания к соответствующему разъёму на корпусе прибора.
- Включите устройство в сеть.
- Наденьте защитные очки (при необходимости).
- Поместите прибор непосредственно на кожу лица.



## Фаза 1


- Поделите лицо на 3 области.
- Нажмите на кнопку включения Power, а затем на кнопку Mode для активации режима пульсирующего воздействия.
- Начните процедуру круговыми движениями с основания шеи. Медленно скользите по поверхности кожи, прорабатывая каждую область в течение 3-х минут. Общее время воздействия — 9 минут.

**Примечание.** Во время использования каждые 3 минуты будет раздаваться звуковой сигнал.

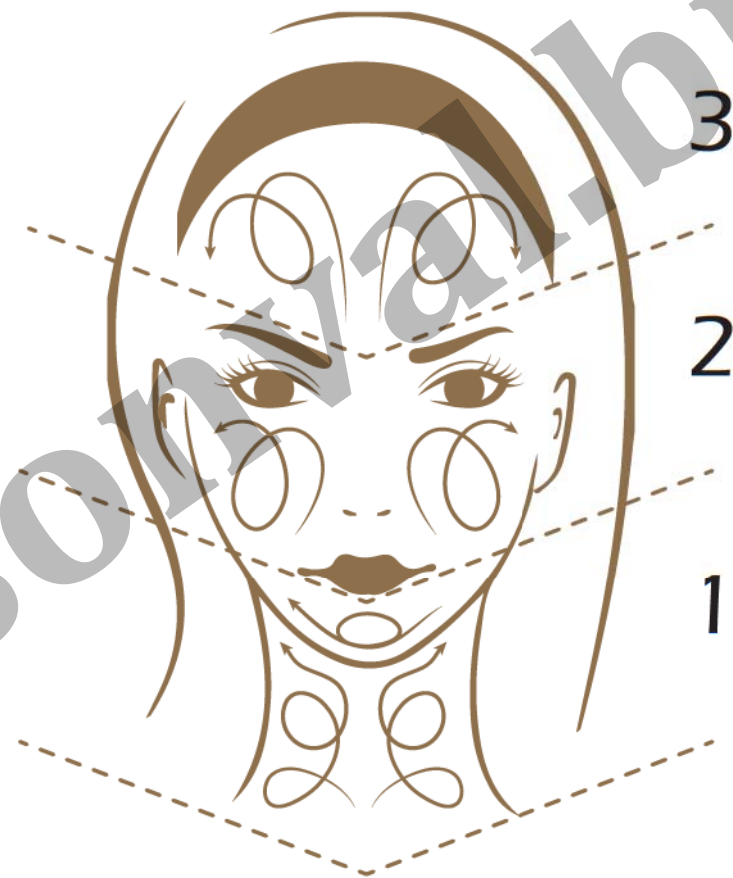


## Фаза 2

- Поделите лицо на 5 областей.
- Нажмите на кнопку Mode ещё раз для активации режима непрерывного воздействия. Медленными круговыми движениями прорабатывайте каждую область в течение 3-х минут. Общее время воздействия — 15 минут.
- Через 24 минуты прибор выключится автоматически.
- При необходимости вы можете сменить насадку.
- Для снятия насадки нажмите на кнопку разблокировки и потяните её на себя.
- В конце процедуры нанесите увлажняющий крем по типу кожи.

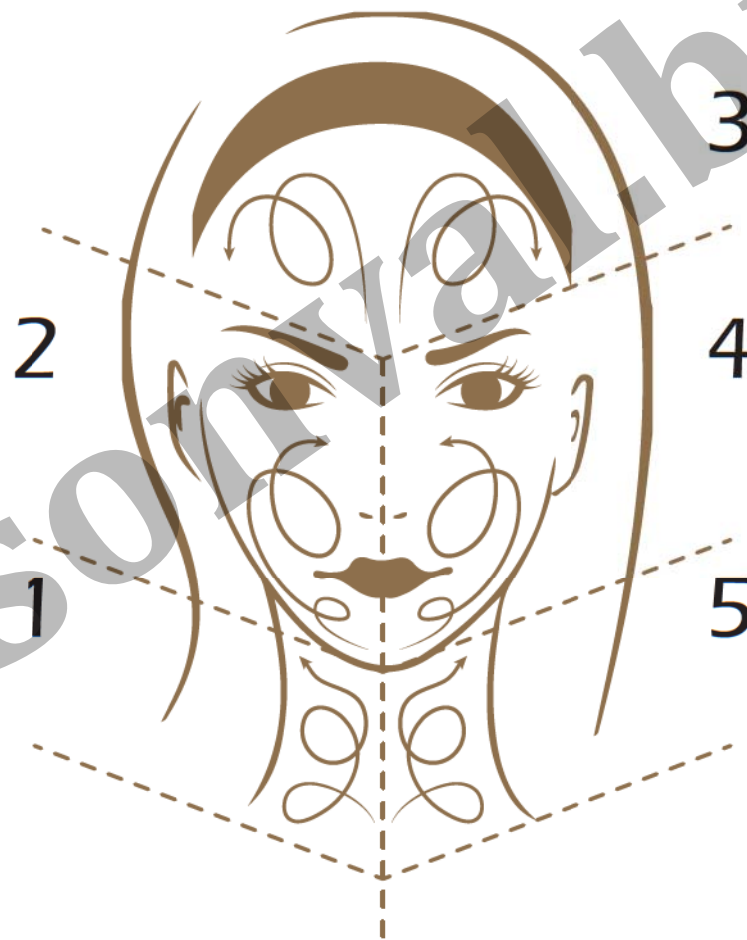

Вы можете проводить процедуру на любой части тела: животе, спине, руках, ногах, бёдрах и ягодицах.

- Поделите тело на несколько областей (они отмечены цифрами на рисунках справа).
- Очистите выбранную область и дайте ей высохнуть.
- При необходимости нанесите на кожу увлажняющий крем, не содержащий витамин А (только для красной и золотой насадки).
- Проводите процедуру при полном контакте прибора с кожей.
- Нажмите на кнопку Power для включения устройства, чтобы активировать режим непрерывного воздействия.
- Медленными круговыми движениями прорабатывайте выбранную область в течение 24-х минут.
- Через 24 минуты прибор выключится автоматически.

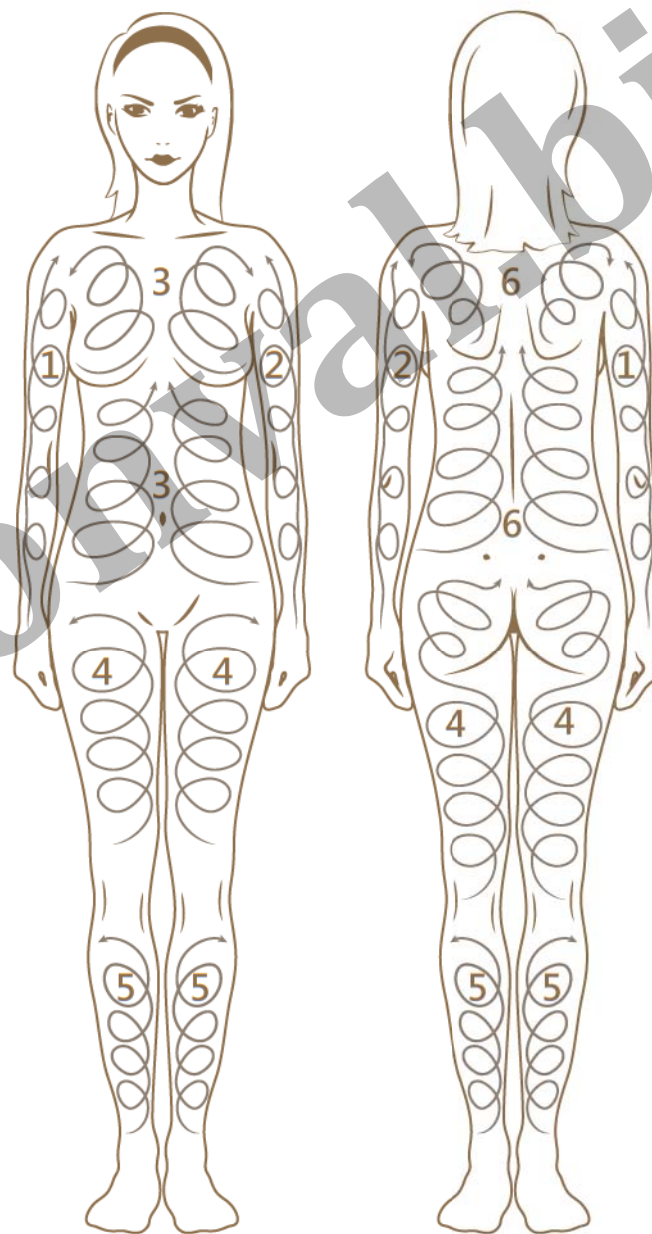

## ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ

**Вопрос:** Есть ли научные подтверждения эффективности фототерапии (светотерапии)?

**Ответ:** Фототерапия была тщательно изучена и её эффективность была подтверждена многими исследовательскими университетами и медицинскими лабораториями.

**Вопрос:** На какие части тела можно воздействовать с помощью прибора?

**Ответ:** Можно воздействовать абсолютно на любые части тела, в т.ч. лицо, шею, область декольте.

**Вопрос:** Является ли данный прибор безопасным?

**Ответ:** Данный прибор полностью безопасен.

**Вопрос:** Чем отличается фототерапия от лазерного воздействия?

**Ответ:** Фототерапия является безопасной, неагрессивной, безболезненной процедурой без побочных эффектов.

**Вопрос:** Можно ли проводить процедуру с использованием медицинских препаратов?

**Ответ:** Да, данная процедура идеально сочетается со многими препаратами и кремами (например, с содержанием серума), а также со многими косметическими процедурами (например, микродермабразией).

**Вопрос:** Является ли эффект постоянным?

**Ответ:** Да, при регулярном использовании. Необходимо поддерживать результат.

**Вопрос:** Сколько времени потребуется, чтобы увидеть результат?

**Ответ:** Это зависит от индивидуального пользователя. На скорость получения результата влияют такие показатели, как возраст, текущее состояние кожи, питание, наличие вредных привычек (употребление алкоголя, курение) и т.д. Таким образом, большинство людей видят результат через 4–8 недель, но некоторые гораздо раньше — через 1–3 недели после использования.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Прибор для LED-фототерапии
Модель	Therapy Gold
Питание	220–240 В; 50/60 Гц
Таймер	24 минуты
Размеры Д×Ш×В (без насадки)	178×52×57 мм
Вес (без насадки)	≈0,105 кг
Рабочий режим	Температура 10-40° С Влажность 30-85%
Режим хранения	Температура 10-40° С Влажность 30-85%

## ОЧИСТКА И УХОД

Прежде чем начать чистить прибор отключите его от сети.

Протрите корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью.

Очищайте поверхность насадок спиртом после каждого использования. Не промывайте их водой.

Не погружайте прибор в воду.

Для чистки прибора не используйте абразивные чистящие средства, щётки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

Не промывайте водой адаптер. Протирайте его сухой мягкой тканью.


## ХРАНЕНИЕ


Поместите прибор в упаковку.

Храните устройство в сухом и прохладном месте.

Не храните прибор в местах с повышенной влажностью воздуха. Избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей.


Не обматывайте шнур питания вокруг прибора во время его хранения.

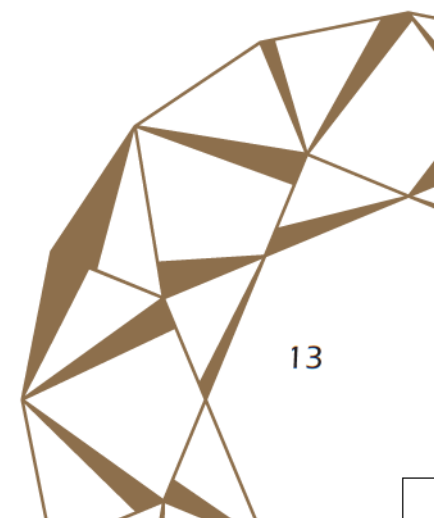

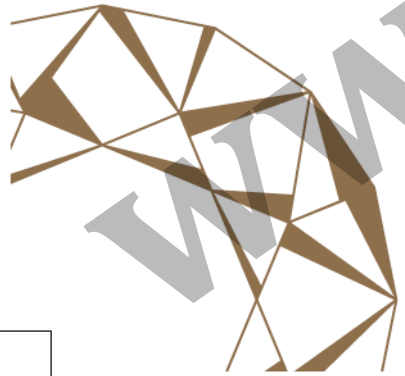

[www.darsonval.biz](http://www.darsonval.biz)

[www.darsonval.biz](http://www.darsonval.biz)

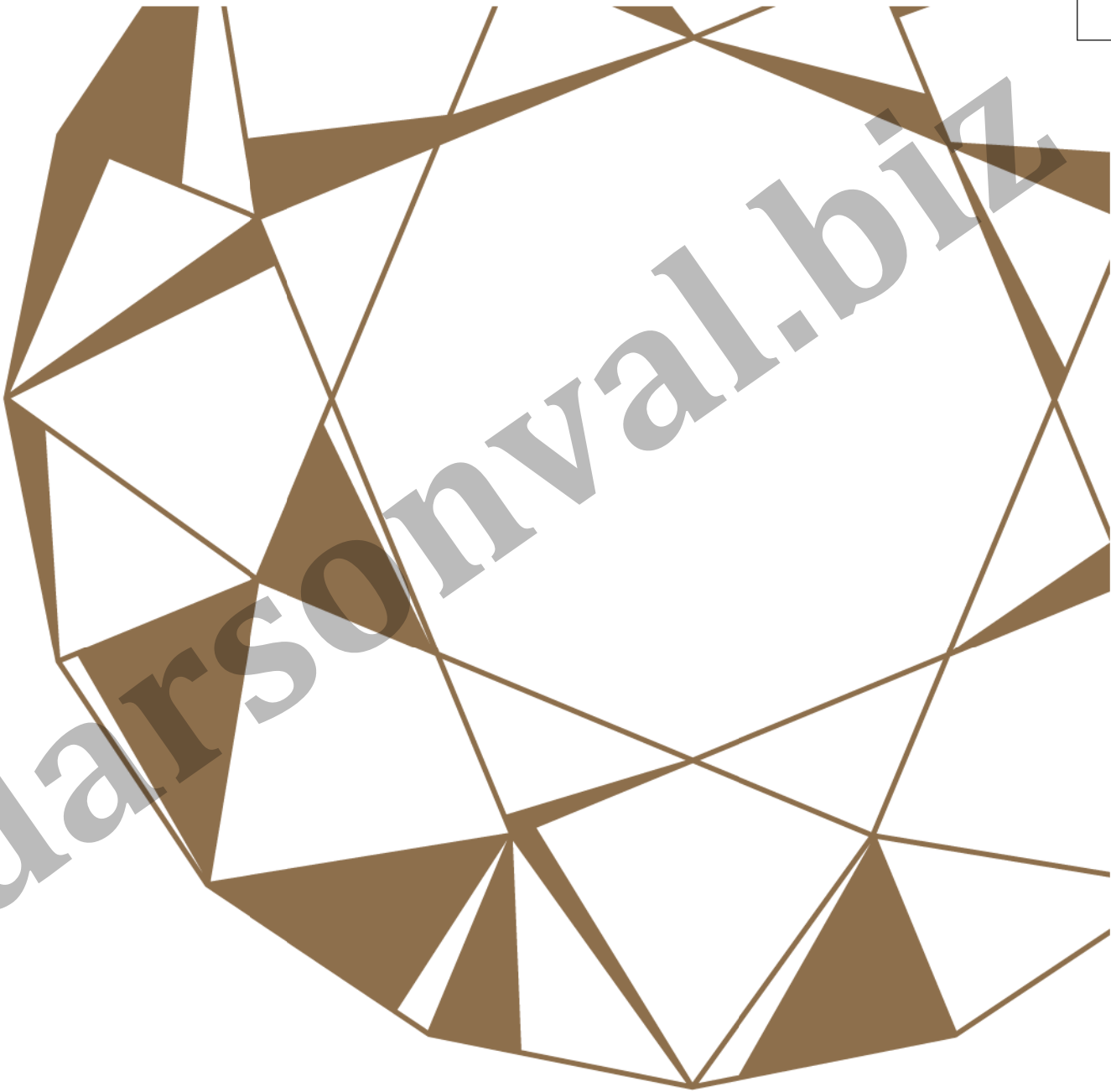

[www.darsonval.biz](http://www.darsonval.biz)

US MEDICA LLC, USA