




b•Queen

US•MEDICA

VELVET SKIN

ULTRASONIC BEAUTY DEVICE FOR BODY
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ ТЕЛА

www.darsonval.biz

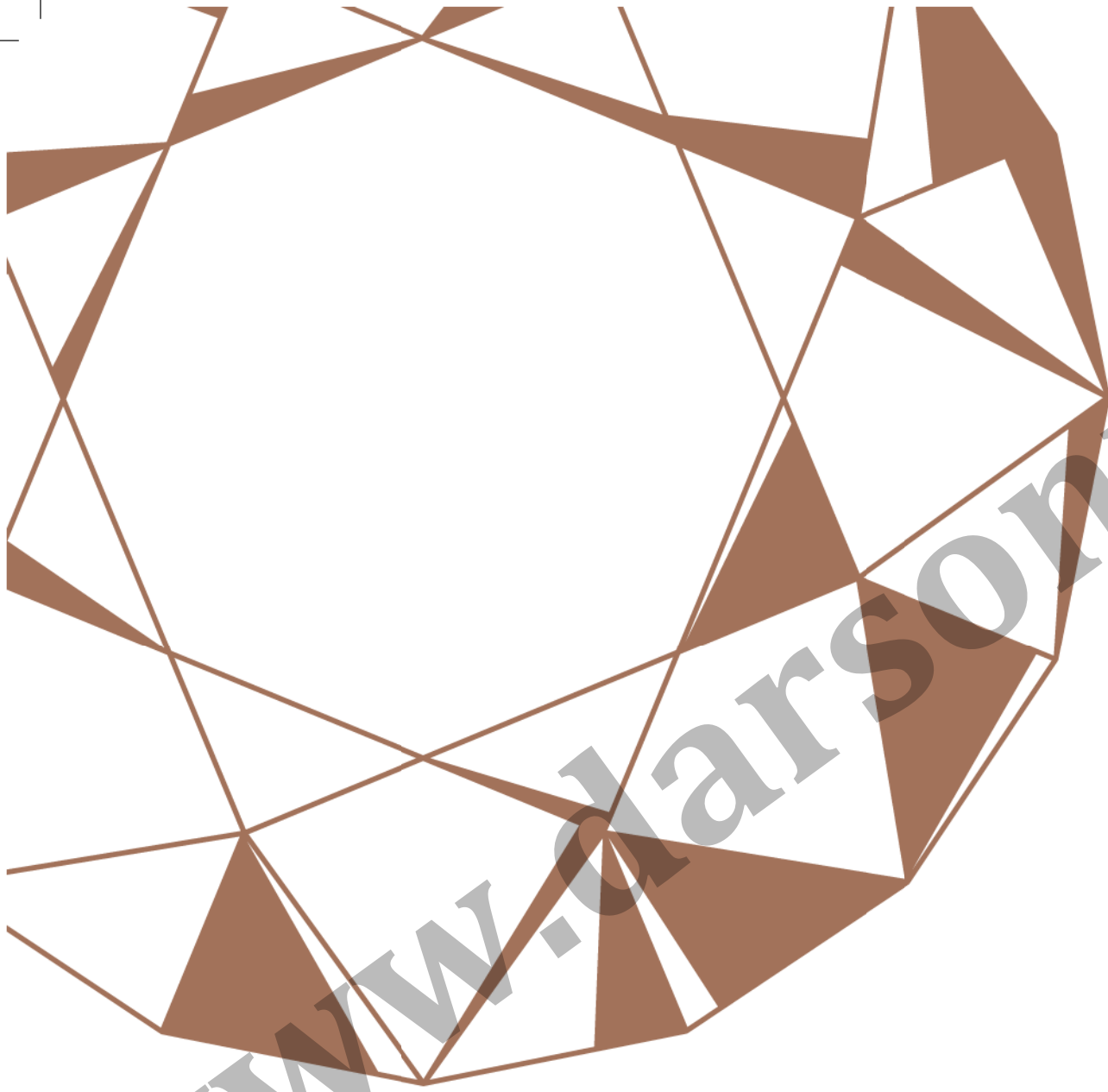

www.clarsonval.biz

Ультразвуковой прибор для тела Velvet Skin от компании US MEDICA предназначен для проведения высокоэффективных процедур по омоложению кожи в домашних условиях.

Что такое ультразвук?

Ультразвук – это звуковые колебания частотой свыше 20 кГц, которые не воспринимаются человеческим ухом.

Почему ультразвуковой прибор Velvet Skin помогает улучшить состояние кожи?

Ультразвук может проникать в кожу на глубину до 3 см. Благодаря активизации работы клеток и стимулированию циркуляции крови в капиллярах ультразвук улучшает клеточный метаболизм тканей, и кожа начинает эффективнее поглощать питательные вещества. Кроме того, ультразвук может снижать интенсивность старения клеток и уменьшать морщины. Кожа при этом становится более упругой и сияющей. Активный элемент аппарата генерирует ультразвуковые колебания с частотой 5 МГц (пять млн. колебаний в секунду), которые заставляют ткани изменять свою плотность (сжиматься и разжиматься) с такой же частотой.

Воздействие осуществляется за счёт передачи колебаний через тонкий слой воды или косметического средства на поверхности кожи. Ультразвук повышает эффективность препаратов при одновременном снижении их расхода, способствует глубокому внутриклеточному проникновению косметических средств, усиливает метаболизм кожной ткани, стимулирует циркуляцию, гидратирует клетки кожи, снимает спазмы и отёки, разглаживает морщины, не травмирует и не растягивает кожу.

Прибор Velvet Skin также можно использовать для уменьшения объёмов тела, т.к. ультразвук, генерируемый прибором, проникает вглубь кожи, достигая жировой прослойки. Он способствует разложению жира и превращению его в тепло, помогая худеть. При этом необходимо использовать крем для похудения, рекомендованный вашим косметологом.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Разглаживает морщины
2. Способствует более глубокому проникновению косметических средств вглубь кожи
3. Усиливает метаболизм тканей
4. Избавляет от лишнего веса

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Проконсультируйтесь с врачом-дерматологом перед использованием прибора, если вы проходите у него курс лечения.
- Используйте прибор строго по его прямому назначению, следуя рекомендациям, изложенным в данном руководстве.
- Всегда используйте только приспособления, поставляемые производителем.
- Перед первым использованием осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться прибором без присмотра со стороны.
- Следите за тем, чтобы шнур питания во время зарядки прибора не был перекручен, запутан или натянут во избежание повреждения или возгорания.
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство или сетевой адаптер! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Не используйте сетевой адаптер, если он был повреждён в результате падения или удара. Это

может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.

- При использовании косметического крема для кожи необходимо соблюдать рекомендации вашего косметолога.
- Заряжайте прибор вдали от мест с повышенной влажностью, ванных комнат.
- Не разбирайте батарею, находящуюся внутри прибора.
- Не используйте прибор на области вокруг глаз!
- Не используйте прибор дольше 10 минут за один сеанс и более трёх раз в неделю.
- Не используйте прибор в области сердца.
- Данное устройство не является водонепроницаемым. Не погружайте его в воду и не используйте в душе!
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!
- Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.


Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:

- Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы
- Беременность
- Дерматит
- Аллергические высыпания
- Очень чувствительная кожа
- Солнечные ожоги

КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Прибор x 1
Шнур питания с сетевым адаптером x 1
Подставка x 1
Руководство пользователя x 1
Упаковочная коробка* x 1

*Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

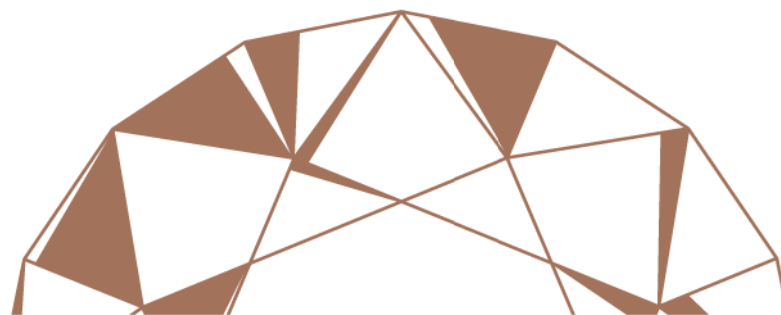

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Индикатор высокого уровня интенсивности High

Индикатор низкого уровня интенсивности Low

Индикатор процесса зарядки Charge


Кнопка выбора уровня интенсивности



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Режим для нормальной кожи

- Поделите тело на несколько областей (они отмечены цифрами).
- Очистите выбранную область.
- Нанесите 4-5 мл увлажняющего, антивозрастного или питательного косметического средства на рабочую поверхность прибора (т.е. на 2/3 её площади).
- Дополнительно нанесите косметическое средство на кожу в нескольких точках.
- Нажимайте на кнопку на корпусе устройства для выбора высокого уровня интенсивности High. Он идеально подходит для нормальной кожи.
- Поместите рабочую поверхность прибора на кожу и медленными круговыми движениями прорабатывайте выбранную область.
- Прибор, работающий с интенсивностью High, каждые 9 секунд будет издавать 2 звуковых сигнала.
- Длительность процедуры составляет 10 минут. Через это время прибор выключится автоматически.
- Проводите процедуру не чаще 3-х раз в неделю.

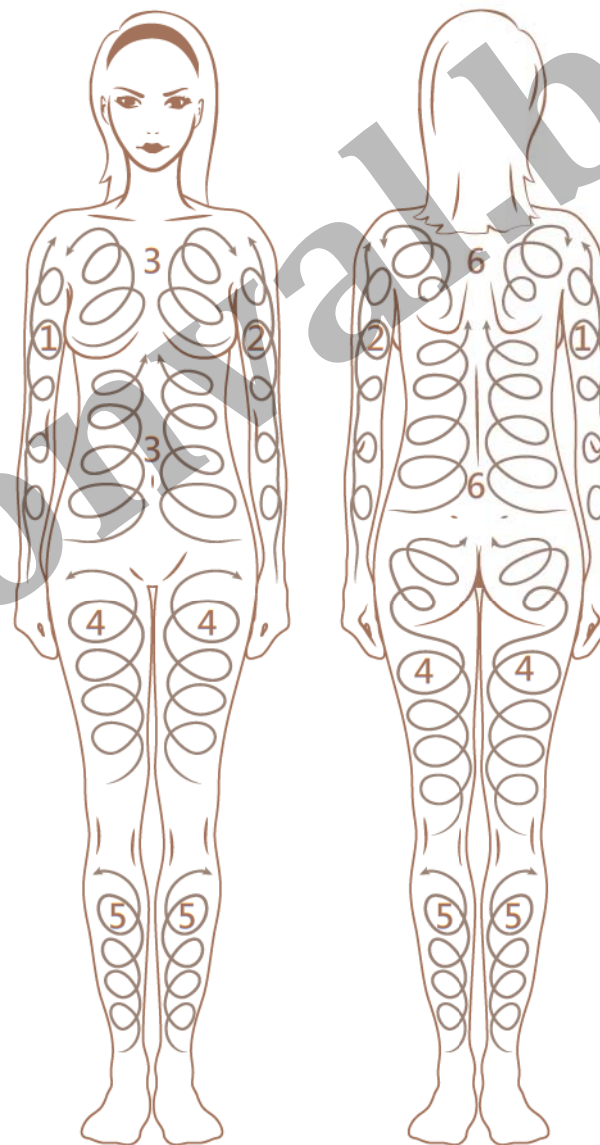

Режим для чувствительной кожи

- Поделите тело на несколько областей.
- Очистите выбранную область.
- Нанесите 4-5 мл увлажняющего, антивозрастного или питательного косметического средства на рабочую поверхность прибора (т.е. на 2/3 её площади).
- Дополнительно нанесите косметическое средство на кожу в нескольких точках.
- Нажимайте на кнопку на корпусе устройства для выбора низкого уровня интенсивности Low. Он идеально подходит для чувствительной кожи или при использовании прибора впервые.
- Поместите рабочую поверхность прибора на кожу и медленными круговыми движениями прорабатывайте выбранную область.
- Прибор, работающий с интенсивностью Low, каждые 9 секунд будет издавать 1 звуковой сигнал.
- Длительность процедуры составляет 10 минут. Через это время прибор выключится автоматически.
- Проводите процедуру не чаще 3-х раз в неделю.

Внимание! Не прилагайте излишних усилий и не давите на устройство во время процедуры (это может привести к снижению эффективности его работы).

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

- Подключите зарядное устройство к разъёму на корпусе прибора.
- Включите адаптер в сеть.
- Индикатор процесса зарядки батареи Charge загорится зелёным светом.
- При регулярном использовании прибора процесс зарядки занимает от 8 до 12 часов.

Примечание. Перед первым использованием (а также если устройство не использовалось в течение длительного времени) процесс зарядки занимает более 12 часов.

- После того как батарея полностью зарядится, индикатор погаснет.
- Внимание!** Во время зарядки прибор не работает.
- После полной зарядки батареи время работы прибора составляет около 30 минут.

ОЧИСТКА И УХОД

С помощью мягкой ткани или салфетки удалите остатки крема с ультразвукового аппликатора. Протрите корпус устройства мягкой слегка влажной тканью.

Во время чистки устройства не погружайте его в воду или другие жидкости.


Для чистки прибора не используйте абразивные чистящие средства, щётки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

ХРАНЕНИЕ

Поместите прибор в упаковку.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Не обматывайте шнур питания вокруг прибора во время его хранения.

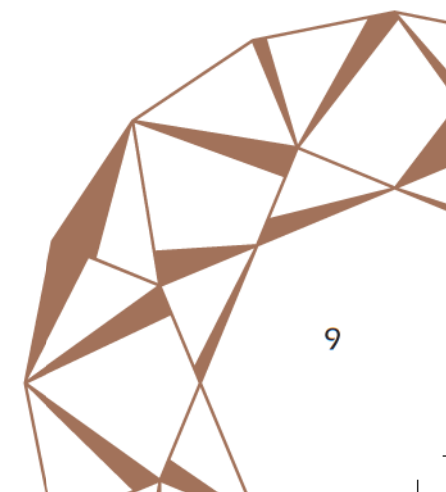

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Ультразвуковой прибор для тела
Модель	Velvet Skin
Напряжение	12 В
Характеристики адаптера	100-240 В; 50-60 Гц
Частота ультразвука	5 МГц
Питание	Ni-MH аккумуляторная батарея 4,8 В; 700 мАч
Количество циклов заряда батареи	500 циклов
Время зарядки	8-12 часов
Таймер	10 ± 1 минута
Габариты ДхШхВ	172x55x55 мм
Рабочий режим	Температура 10-40° С Влажность 30-90%
Режим хранения	Температура 20-60° С Влажность 30-90%

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Батарея разрядилась	Зарядите батарею
	Прибор заряжается	Во время зарядки прибор не работает
После подключения адаптера индикатор процесса зарядки не загорается	Неправильное подключение	Подключите адаптер правильно
	Вы используете адаптер не из комплекта поставки	Это очень опасно. Используйте только адаптер, идущий в комплекте
Сразу после покупки устройство не работает	Батарея не заряжена	Зарядите батарею

www.darsonval.biz

www.darsonval.biz

US MEDICA LLC, USA