

Vitek®

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MANUAL INSTRUCTION**

**НОЖНОЙ МАССАЖЕР
С ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
BASIC INFRARED BUBBLE FOOT MASSAGER**



МОДЕЛЬ VT-1386

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, гарантийный талон и, если возможно, упаковку.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не держите прибор вблизи источников высокой температуры, солнечного света и влаги.
- Отключайте массажер от сети, если Вы им не пользуетесь, а также перед чисткой.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Следите, чтобы дети пользовались массажером только в присутствии взрослых.
- Не пользуйтесь прибором, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других частей.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора.
- Заполняйте массажер только водой. Не используйте масла, гели и другие жидкости.
- Пользуйтесь массажером не более 20 минут подряд.
- Перед использованием прибора, сядьте и опустите ноги в массажер. Прежде чем встать, выньте ноги из массажера.
- Отключайте прибор от сети только сухими руками.

ВНИМАНИЕ!

1. При наличии каких-либо проблем со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед эксплуатацией прибора. Особенно это рекомендуется людям с сердечными заболеваниями, диабетом, а также беременным женщинам.
2. Если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем обратитесь к врачу.
3. Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если у Вас на ногах открытые раны, ожоги, опухоли и т.п.

ОСОБЕННОСТИ ПУЗЫРЬКОВОГО МАССАЖЕРА

- Инфракрасное излучение обеспечивает более эффективный проникающий и нежный массаж для стимуляции подошв Ваших ног благодаря высокой температуре воды.
- Тысячи пузырьков и поддерживаемая высокая температура воды помогают снять напряжение и тяжесть в мышцах.
- Вращающиеся насадки на поверхности массажера предназначены для эффективной стимуляции и массажа Ваших подошв.


Воздействие инфракрасного излучения

Инфракрасное излучение обеспечивает глубокую стимуляцию кожи, кровеносных сосудов; улучшает кровообращение. Благодаря воздействию излучения происходит более быстрое обновление клеток.

Инфракрасное излучение применимо как в лечебных, так и в косметических целях.

ЭЛЕМЕНТЫ МАССАЖЕРА

1. Функциональный переключатель
2. Инфракрасная пластина
3. Пузырьковые полосы
4. Кнопка "Вкл./Выкл." для дополнительных насадок
5. Вращающиеся насадки для более эффективной стимуляции подошв

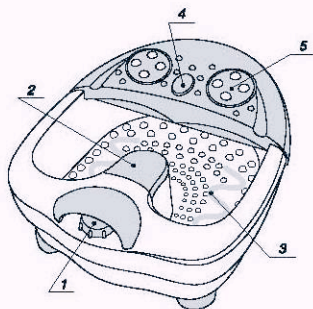

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖЕРА

Вы можете выбрать тип массажа по Вашему желанию:

• **Сухой пузырьковый массаж без воды:**

1. Установите массажер перед собой на пол.
2. Подключите прибор к сети.
3. Сядьте и поместите стопы на вращающиеся насадки.
4. Нажмите кнопку “Вкл./Выкл.” для начала вращения дополнительных насадок.
5. По окончании сеанса массажа, нажмите кнопку “Вкл./Выкл.”, чтобы остановить вращение насадок.
6. Отключите прибор от сети.

• **Влажный пузырьковый массаж с использованием воды:**

1. Установите массажер перед собой на пол и наполните его теплой водой до указанной максимальной отметки.
2. Только после этого подключите прибор к сети.
3. Сядьте и опустите ноги в массажер.
4. Выберите тип массажа, установив функциональный переключатель в желаемое положение:
0 = Выкл.
1 = Массаж/Высокая температура воды/Инфракрасное излучение
2 = Пузырьковый массаж/Высокая температура воды/Инфракрасное излучение
3 = Пузырьковый массаж/Высокая температура воды
5. Для выбора типа массажа с инфракрасным излучением, выберите режим *1* или *2*. При этом поместите стопы на инфракрасную пластину поочередно. Высокая температура воды должна оказывать благоприятное воздействие и не доставлять вам дискомфорт.
6. Отключите прибор от сети, и после этого вылейте воду из прибора, наклонив его набок. Следите, чтобы вода не попала на переднюю панель массажера.

ЧИСТКА

- Перед чисткой прибора отключите прибор от сети.
- Протирайте корпус чистой тканью с добавлением мягкого чистящего средства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	230 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность	130 Вт

СРОК СЛУЖБЫ МАССАЖЕРА НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ****Уважаемый покупатель!**

Фирма VITEK выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном VITEK подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервис-центре на территории России.

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. VITEK оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Список сервисных центров

№ п.п.	Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
1.	Москва	Сонико-сервис, ЗАО	Подорожной пер., 12, стр.1 (м. Курская)	(095) 917-03-16
		Сонико-сервис, ЗАО	Холмовский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(095) 917-34-24
		Сонико-сервис, ЗАО	Колокольников пер., 9/10, стр.5 (м. Суварьская)	(095) 208-58-48
2.	Челябинск	Импорт-сервис, ООО	ул. Энтузиастов, 16	(3512) 34-04-95
3.	Красноярск	ИСТОК, СЦ ДОН ТВ	ул. Ленина, 28 ул. Колыцаева, 12	(3012) 66-32-18 (3012) 98-87-09
4.	Воронеж	Орбита-Сервис, ООО	ул. Донбасская, д. 1	(0732) 77-89-25
5.	Волгоград	РадиоТелевид, ООО	ул. Штагенко, 33	(8442) 72-85-58 72-71-27
6.	Рязань	Сервисный центр, ООО	Кубышевское шоссе, 21	(0912) 44-83-17
7.	Смоленск	Парит: СЦ	ул. Фрунзе, д. 22	(0812) 61-88-00
8.	Брянск	Леквис Электроника	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 46-60-31
9.	Ростов-на-Дону	Софт Сервис, СЦ	пер. Острожского, 124	(8632) 39-83-29
10.	Иркутск	ЦД Эверест, ООО	15 Советский пер., 4а	(3952) 45-19-11
11.	Тюль	Данси-Сервис, ООО	ул. Улицы, 26	(3822) 42-42-68
		Азизджан Сервис, ООО	пр. Академический, д. 1	(3822) 25-85-80
12.	Саратов	АНСТ-98	ул. Спиколова, 220 А	(8452) 51-41-99
13.	Киров	ЭКРАН СЕРВИС ООО	ул. Воровского, 43	(8332) 37-20-78 62-79-86
14.	С.-Петербург	КУРСОР ООО	Загородный б-р, 33/1	(812) 108-20-28 108-20-19
15.	Самара	Сервис Центр ООО	ул. Минусина, 15, океан 1/2	(8462) 64-94-63 34-29-70
16.	Волгарьбург	ЧП Шевелю Д.В. ШЕЛ-СЕРВИС	ул. Радчица, 65	(3432) 23-10-20
			ул. Восточная, 44	(3432) 70-62-83
17.	Астрахань	ООО СФ ЭЛКОМ	ул.Красная, 12/2	(8812) 30-06-53
18.	Орск	ООО Астра	пр-т Ленина, 77	(38372) 1-46-89
19.	Владимир	ООО Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0622) 24-08-19
20.	Чебоксары	ЧП Лептеница С.О.	пр. Тракторостроителей, 24	(Дмитрий Варшавин)
21.	Муранок	СРС-Муранок	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 45-50-31
22.	Тамбов	ООО БВС-2000	ул. Энгельса, д. 5 (магазин Юбилейный)	(0762) 76-17-18
23.	Кострома	ЗАО АКСОН-сервис	ул. Сулякина, д. 5	(0942) 22-38-28
24.	Тюль	ТОН плюс	пр-т 50-летия Октября, 36	(0822) 42-32-83
25.	Курган	ТП-сервис	ул. Крайняя, 41	(35222) 6-51-86
26.	Рыбинск	САМСОН	ул.Столца, 19	(0853) 20-14-04
27.	Каленград	Востар-Сервис	ул. Горького, 60	(0112) 27-20-64
28.	Оренбург	КОМИНКОМ	ул. Брестская, 7	(3532) 62-77-01
29.	Сыктывкар	СД-СЕРВИС	ул. Морозов, 189	(8212) 27-14-71
30.	Н. Новгород	Электроника (ЧП Кунацов)	ул. Алюковская, 9	(8312) 16-41-03/10
31.	Казань	ТЕХНИКА	ул. Вильямсового, 14	(8432) 38-31-37/07
32.	Татарстан	КРИСТИ	ул. Фрунзе, 46	(8034) 48-47-64
33.	Ижевск	Радиоконтакт	ул. 9-я Подлесная, 25	(8412) 69-28-06
34.	Белнаул	Ивек - сервис	ул. Палова, 65	(3822) 35-37-60 35-37-31
35.	Новосибирск	ООО "Техностар"	ул. Болышевская, 131	(3832) 12-64-00
36.	Омск	Коммо	Космический пр-т, 97А, к. 4	(3918) 53-98-41

Получать информацию о других сервисных центрах Вы можете у продавца или по адресу в Интернет: www.ivak-ua.ru