


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

массажёр для ног VITESSE VS-951

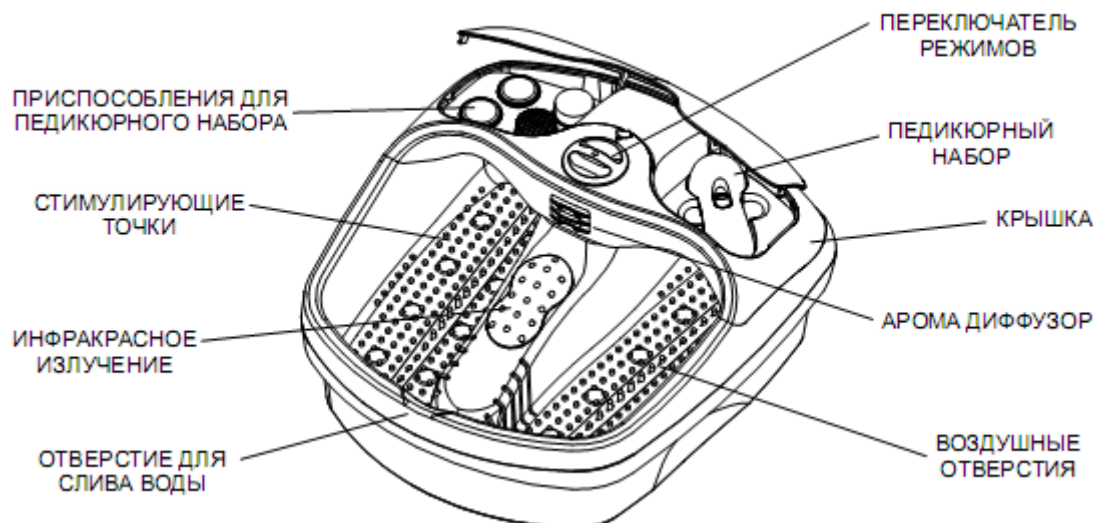

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваша ванночка оснащена евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте прибор только в бытовых условиях.
- Всегда ставьте прибор на ровную поверхность.
- Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, если ноги находятся в воде.
- Нельзя вставать в ванночке. Используйте её только в сидячем положении.
- Обязательно отключайте прибор при его наполнении водой.
- Не используйте прибор во время сна или если вы находитесь в дремотном состоянии.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.
- Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

Эксплуатация.

- Выньте прибор из упаковки.
- Полностью размотайте шнур.
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению прибора.
- Убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Поставьте массажёр перед собой на пол и наполните его водой, не превышая максимальную отметку.
- Удобно сядьте и поставьте ноги на опору для ступней в ванночку массажёра.
- Выберите желаемый режим: подогрев или массаж, или подогрев + массаж.
- После использования отключите прибор от сети, и после этого вылейте воду из прибора, наклонив его набок. Следите, чтобы вода не попала на переднюю панель массажёра.

Режимы массажа.

Воздушные пузырьки + массаж + инфракрасное излучение (В + М + IR).

Установите переключатель на этой отметке, если хотите, чтобы массаж ступней производился в холодной ванночке с воздушными пузырьками. При данной настройке возможен также вибрирующий массаж ступней с инфракрасным излучением.

Подогрев + обдувание (W + A).

Установите переключатель, на этой отметке, если хотите, чтобы массаж

производился в теплой воде.

Уникальный арома диффузор обеспечивает индивидуальную аромотерапию.

Арома диффузор это действительно ароматерапия, так как запах оптимально распространяется под воздействием воздушного потока.

Для этого нужно капнуть несколько капель ароматического масла на ватную подушечку и положить подушечку в арома диффузор. Также можно использовать диффузор как сушилку для ногтей.

Массаж + инфракрасное излучение (M + IR).

Установите переключатель на этой отметке, если хотите, чтобы массаж ступней производился в холодной ванночке. А также при данной настройке возможен вибрирующий массаж ступней с инфракрасным излучением.

Рекомендуемое время массажа.

В целом продолжительность процедур не должна превышать 10-15 мин. По желанию массаж можно производить 1-2 раза в день. Перед повторным применением дайте прибору полностью остыть. В процессе эксплуатации прибора Вы вскоре сами подберете для себя оптимальные режимы и время массажа. Обратитесь к врачу в случае появления некомфортных ощущений во время процедур.

Очистка и уход.

- После использования прибора выньте вилку из электрической розетки и дайте прибору полностью остыть.
- Протирайте корпус сухой тряпочкой с добавлением мягких чистящих средств.
- Прибор нельзя полностью погружать в воду.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом месте.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- После использования дайте ванночке остыть и храните её в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его.

Технические характеристики.

Питание: 230В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 90Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 2-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.