

Массажер для зоны вокруг глаз WELSS WS 5060

Продукция компании WELSS - это ваш
собственный косметологический салон!

Благодарим Вас за выбор данного
продукта.

Руководство пользователя

Перед использованием нужно прочитать данное руководство,
чтобы получить сведения о правильных способах использования.
Это руководство нужно хранить для справок.

Содержание

Область и группы

Введение.....	2
Функции изделия.....	3
Компоненты изделия.....	4
Подготовка.....	5
Управление функциями.....	6
Руководство по эксплуатации.....	7
Меры предосторожности.....	8
Поиск неисправностей и технические характеристики.....	9
Транспортировка, техническое обслуживание и хранение.....	10

Инструкция

Область и группы применения

- Для тех, кто страдает от усталости глаз, ложной близорукости (псевдо миопии)
- Для тех, кто постоянно напрягает глаза и чувствует усталость глаз
- Для тех, кто чувствует напряжение и нервничает
- Для тех, кто страдает от бессонницы, сновидений и неврастении


Функции изделия

- Данное изделие представляет собой multifunctional устройство для поддержания здоровья глаз. Оно также может обеспечить расслабляющий массаж в зонах вокруг глаз. С помощью метода электронного управления, Массажер для зоны вокруг глаз WELSS WS 5060 позволяет человеку проводить массаж самостоятельно в домашних условиях.
- Аппарат включает современный высокотехнологичный инфракрасный генератор тепла, который активизирует клетки вокруг глаз, стимулирует молекулы клеток с помощью вибраций, укрепляет комбинацию молекул и повышает регенерирующую способность тканей, повышая, таким образом, иммунитет в отношении болезней и инфекций.
- В данном изделии успешно применяется концепция легкого давления воздуха для защиты глаз и поддержания их


здоровья. Давление воздуха обеспечивает общий массаж глаз под управлением микрокомпьютера. Этот процесс может снизить напряжение глаз, улучшить работу ресничной мышцы и предотвратить дисперию оптической оси.

- Массажер для зоны вокруг глаз WELSS WS 5060 также имеет внутреннее трехмерное магнитное поле. Постоянное перемещение магнитного поля обеспечивает эффективный массаж основных участков лица и мышц вокруг глаз, генерируя микротоки в кровеносных сосудах и активируя циркуляцию крови вокруг глаз

Точки акупунктуры и массаж

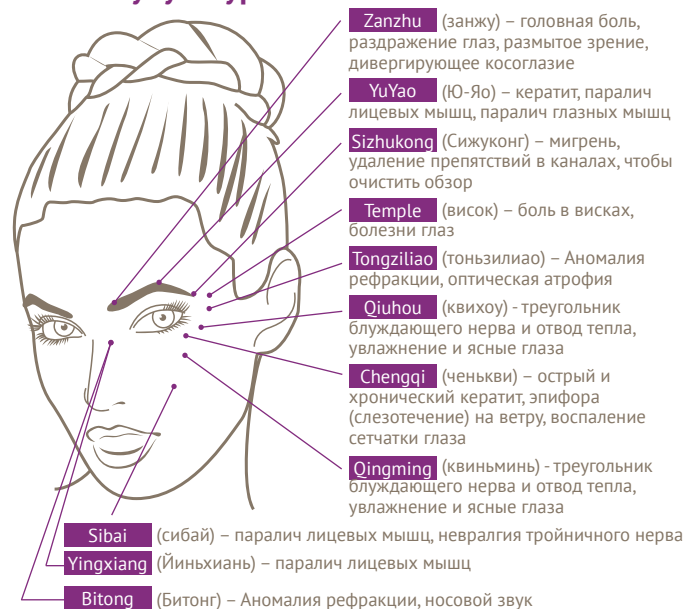

Конфигурация изделия

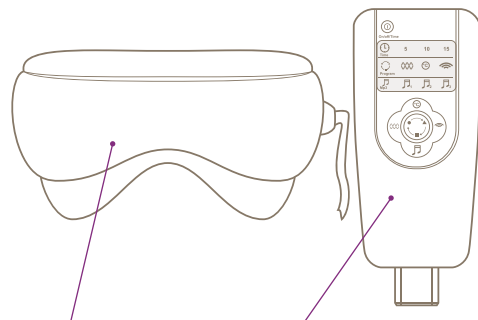


Главное устройство

Пульт ручного управления

Подготовка

Установка батарей


1. Откройте крышку отсека для батарей на задней панели пульта управления
2. Вставьте 2 батареи AA, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека для батарей

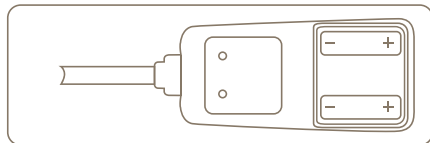

Внимание: проверьте полярность установки батарей и убедитесь, что они установлены правильно. Закройте крышку отсека для батарей.

Установка адаптера


1. Подключите адаптер питания на 6 В к электросети.
2. Затем вставьте штекер постоянного тока в гнездо постоянного тока на пульте управления.
3. Соедините вилку постоянного тока с источником переменного тока.

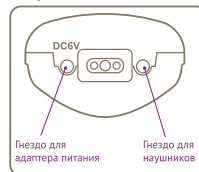

1. Подключите адаптер питания на 6 В к электросети




2. Наденьте массажер на глаза

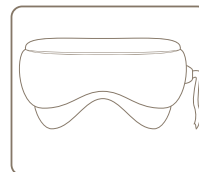

3. Отрегулируйте застёжку, чтобы вам было комфортно

Эксплуатация

Пульт ручного управления массажера WELSS WS 5060

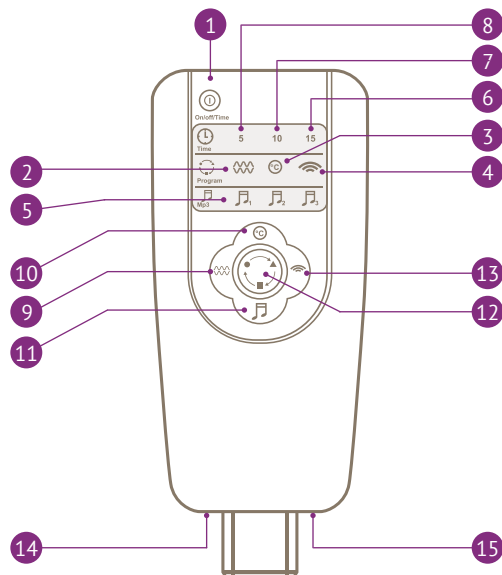

1. ON/OFF/TIME - Включение/ Выключение/ Время
2. Индикатор давления воздуха
3. Индикатор нагрева
4. Индикатор вибраций
5. Индикатор музыки
6. Индикатор таймера на 15 минут
7. Индикатор таймера на 10 минут
8. Индикатор таймера на 5 минут

9. Кнопка выбора давления воздуха
10. Кнопка выбора режима нагрева
11. Кнопка выбора музыки
12. Кнопка выбора функций
13. Кнопка выбора вибраций
14. Разъем подключения адаптера постоянного тока
15. Разъем подключения наушников

Переключатель ON/OFF (ВКЛ/ ВЫКЛ)

Air	Heat	Time	Music	Vibration
Воздух	Тепло	Время	Музыка	Вибрации

Внимание: Устройство начнет работать при нажатии кнопки ON/OFF (вкл/выкл). На пульте управления засветится индикатор давления воздуха, индикатор нагрева, индикатор музыки и индикатор таймера на 15 минут. По умолчанию: Давление воздуха + пропаривание, низкая температура, давление уровня 1, 15 минут, релаксирующая музыка.

Включение / отключение

Включение : Нажмите кнопку On/Time/Off

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку On/Time/Off

Переключение режимов времени:

15min/10min/5 min – Нажмите кнопку On/Time/Off

Выбор музыки

Relaxingmusic (Релаксирующая музыка)	Нужно нажать кнопку музыки (Music), чтобы выбрать следующую дорожку
Brainwave music (мозговые волны)	Нужно нажать и удерживать кнопку музыки (Music), чтобы остановить музыку
Nature music (естественная музыка)	

Режим автоматического массажа

Внимание: В режиме автоматического массажа нажмите кнопку , чтобы выбрать одну из 3 следующих программ автоматического массажа.

Режим массажа под давлением воздуха	Круговой (лампочка мигает)
	Давление уровня 1
	Давление уровня 2
	Давление уровня 3
Выбор нагревания	Низкая температура
	Высокая температура
Переключение времени	15 минут
	10 минут
	5 минут
Режим вибрационного массажа	Мигает 2 раза
	Мигает 10 раз

Меры предосторожности

- Для правильного и безопасного использования этого массажера нужно внимательно прочитать это Руководство Пользователя
- Нельзя использовать аппарат операции на глазах или лечения травмы глаз, глаукомы, катаракты, отслоение сетчатки или при других серьезных заболеваниях глаз и т.п.
- Нельзя использовать этот аппарат лицам, страдающим заболеваниями сердца, гипертонии и гипотензии
- Нельзя использовать этот аппарат заторможенным людям и людям с ограниченными физическими, умственными или интеллектуальными возможностями.
- Нельзя использовать растворители, бензин, чистящие средства на базе хлоридов, щелочей или кислот.
- Прекращайте использовать аппарат, если у вас появилось заболевание глаз.
- Если требуется чистка аппарата, протрите его ваткой, смоченной в спирту. Нельзя использовать воду или мыть это устройство.

Внимание

- Нужно сначала надеть устройство и только затем включить, чтобы не повредить воздушный мешок из-за превышения давления
- Нельзя носить контактные линзы при использовании данного изделия
- Нельзя использовать данный аппарат в среде с высокой температурой или влажностью
- Нельзя использовать данный аппарат во время вождения автомобиля или прогулке.
- Дети до 8 лет могут использовать этот аппарат только под

наблюдением взрослых

- Нужно вынуть батареи на время хранения
- При использовании аппарата рекомендуется закрыть глаза
- Детям не рекомендуется использовать аппарат более 20 минут
- Данный аппарат является бытовым электроприбором, поэтому его нельзя использовать для диагностики и лечения или для других коммерческих целей
- Нельзя бросать устройство на пол или опускать в воду.

Поиск неисправностей

Если возникли проблемы при использовании этого устройства, нужно следовать инструкциям ниже. Если проблема все ещё существует и устройство не может работать нормально, в этом случае нужно отключить устройство от сети и обратиться в сервисный центр.

Нельзя разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно

Проблема	Возможные причины неисправности	Решение проблемы
Не включается	Слабый заряд батареи	Нужно заменить батарею
	Неправильно установлены батареи	Установите батареи правильно, соблюдая полярность электродов. Убедитесь, что батарея зафиксирована в держателе
	Не закреплены кабельные соединения	Обеспечьте правильное соединение
	Не в порядке кабель	Проверьте кабельные соединения, если кабели повреждены, обратитесь к производителю
Слишком тусклый свет	Слабый заряд батареи	Нужно заменить батарею

Слишком слабое давление воздуха Fomenting (пропаривание)	Слабый заряд батареи	Нужно заменить батарею
		Убедитесь, что батарея установлена и закреплена в отсеке для батарей

Технические характеристики:

Относительная влажность:	≤80%
Атмосферное давление:	860 ГПа – 1060 ГПа
Сила магнитного поля:	50 мТ – 250 мТ
Пропаривание (лечение влажным теплом):	30 С– 42 С
Мощность на входе:	6 В постоянного тока, 1 А
Мощность: 6 Вт. Батарея:	1.5V AAA 4шт(в комплект не входит)
Размер:	10.5x20x11см
Размер упаковки:	24.9x24.9x9.4см
Вес:	468 г
Режим t°:	5-40°C

Комплектация: упаковка, устройство, пульт управления, адаптер, наушники, инструкция.

Техническое обслуживание, транспортировка, хранение, гарантия

Техническое обслуживание

Если требуется чистка, нужно протереть устройство ватой, смоченной в спирте.

После использования нужно положить устройство в безопасное место. Нельзя класть на аппарат тяжелые предметы.

Прежде чем чистить ручной пульт управления, нужно отключить устройство.

Принимайте меры по предотвращению попадания влаги, грызунов или грязи.

В случае неисправности обращайтесь к квалифицированным техникам. Нельзя разбирать устройство самостоятельно.

Транспортировка и хранение

Температура окружающей среды: 5 °C ...-40 °C

Относительная влажность: ≤80%

Обеспечьте хорошую вентиляцию, держите устройство подальше от солнечного света и агрессивных газов.

Атмосферное давление: 860 ГПа – 1060 ГПа

Транспортировка:

Изделие имеет простую противоударную конструкцию и может перевозиться воздушным транспортом, по железной дороге, автотранспортом или морским транспортом: избегайте попадания под дождь, снег, избегайте ударов и всегда держите соответствующей стороной вверх.

В случае хранения в течение 6 месяцев нужно проверить аппарат и включить питание на полчаса.

Хранить в недоступном для детей месте.

Обеспечьте хорошую вентиляцию, держите устройство подальше от солнечного света и агрессивных газов.

Комплектация: упаковка, устройство, пульт управления, адаптер, наушники, инструкция.

Импортер:

ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки

Телефон сервисного центра: +7 (495) 774-57-14

Завод изготовитель

Bless International China/Блесс Интернешнл, Китай

www.welss.ru



Массажер для
зоны вокруг глаз
WELSS WS 5060



WS 5060