

Система по уходу за лицом и телом WELSS WS 7040

Мы поздравляем Вас с приобретением Системы по уходу за лицом и телом WELSS WS 7040.

Аппарат компактен и удобен в использовании.

Подарите своему телу красоту и молодость!

Компания WELSS вам в этом поможет!

Продукция компании WELSS - это ваш собственный косметологический салон!

Теперь в домашних условиях Вам доступны:

Ультразвуковой массаж:

- Повысит эластичность и упругость вашей кожи.
- Разгладит и выровнит проблемные зоны.
- Предотвратит появление целлюлита.
- Поспособствует выработке коллагена.
- Подтянет и укрепит мышцы.
- Поможет повысить тонус кожи и подкожных тканей.
- Выведет ненужную воду из проблемных зон.
- Нормализует деятельность сальных желез.

Гальванотерапия:

- Выведет токсины и продукты метаболизма из клеточных тканей.
- Повысит упругость кожи, ее увлажнение, омоложение.
- Насытит кислородом клеточные ткани.
- Разгладит морщины лица и шеи.
- Улучшит кровообращение.
- Устранит отеки, пигментные пятна, угревые высыпания.
- Повысит устойчивость кожи к стрессам и неблагоприятным условиям внешней среды.

Квантовая терапия:

- Улучшит микроциркуляцию крови.
- Ускорит клеточный метаболизм.
- Повысит выработку АТФ.
- Усилит синтез коллагена.
- Предотвратит образование морщин.
- Уменьшит отечность кожи.
- Избавит от темных кругов под глазами.
- Придаст коже здоровый, свежий вид.

Оглавление

Меры предосторожности.....	5
Подготовка к процедурам	5
Программы по уходу	5
Устройство	6
Руководство пользователя.....	7
Ультразвуковой массаж.....	7
Массаж лица.....	8
Массаж тела.....	12
Гальванотерапия.....	13
Квантовая терапия.....	14
После процедур.....	15
Возможные побочные эффекты.....	16
Противопоказания.....	16
Уход.....	17
Устранение неполадок.....	17
Спецификация.....	18

Меры предосторожности


Важно! Внимательно прочитайте следующую информацию перед использованием массажера.

Храните массажер вдали от мест повышенной влажности и не используйте его под водой. В противном случае возможно образование ржавчины и короткое замыкание.

- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно. Ремонт массажера необходимо производить только у специалистов .
- Для работы массажера используйте адаптер, который входит в комплект. Использование других адаптеров может привести к порче устройства.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Подготовка к процедурам

- Снимите все ювелирные украшения.
- Очистите от загрязнений и косметики тот участок тела, где предполагается проведение процедуры.
- Снимите предохранительный стикер с зонда массажера. Очистите открытую поверхность сухой или влажной салфеткой.
- Подсоедините зарядное устройство к массажеру

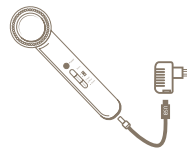

- Вставьте вилку питания в электрическую розетку. Убедитесь, что устройство «не болтается» и плотно присоединено к электросети.

Перед началом использования необходимо заряжать устройство не менее 3 часов.

Программы по уходу


Для наилучших результатов используйте поэтапно три программы терапии:

Шаг 1 - Ультразвуковой массаж

Шаг 2 - Гальванотерапия/ионотерапия

Шаг 3 - Квантовая терапия

Устройство

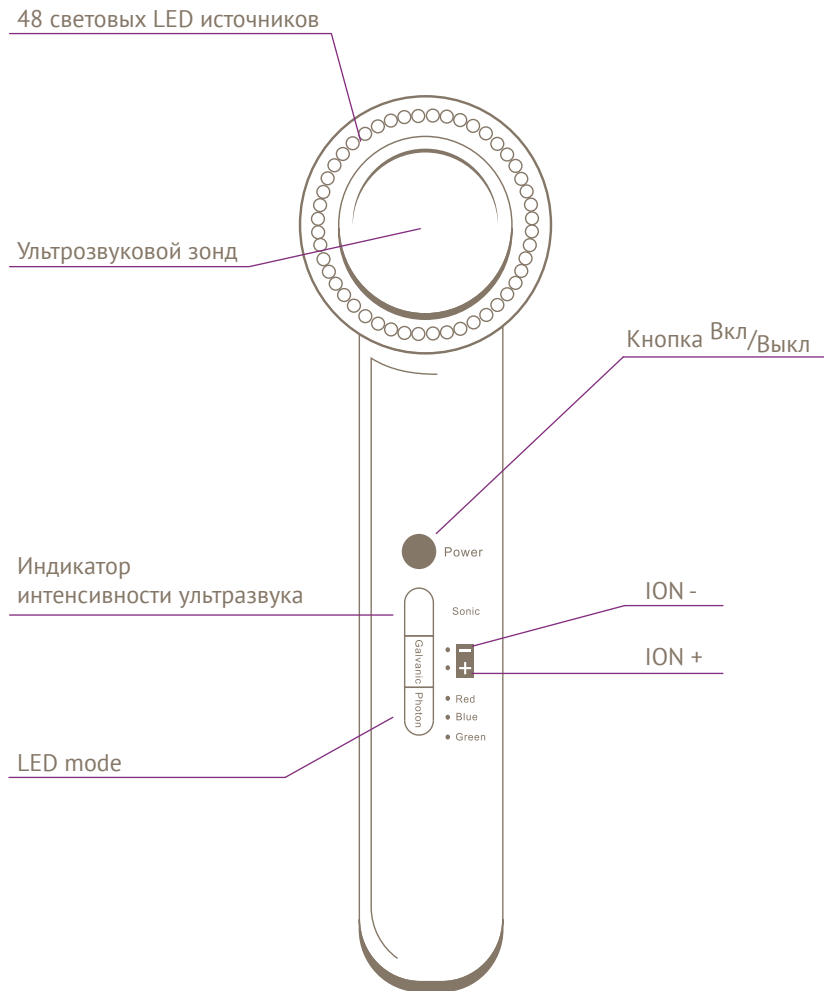

Руководство пользователя

1. Перед использованием массажера тщательно очистите кожу.
2. Для ультразвуковой чистки нанесите необходимое количество очищающего геля на лицо и на рабочую поверхность массажера.

Комбинация: ультразвук + «Ion+». Продолжительность процедуры 2-3 минуты.

3. Для омолаживающего массажа нанесите необходимое количество эмульсии (геля) против морщин на лицо и на рабочую поверхность массажера.

Комбинация: ультразвук + «Ion-» + красный индикатор. Продолжительность процедуры 10 минут.

4. Для лечения акне нанесите необходимое количество лечебной эмульсии (геля) на лицо и на рабочую поверхность массажера.

Комбинация: ультразвук + «Ion-» + синий индикатор. Продолжительность процедуры 10 минут.

Важно. Для наилучшей проводимости ультразвуковых волн используйте косметические средства на гелевой основе.

Ультразвуковой микромассаж

Система по уходу за лицом и телом WELSS WS 7040 используется для лица и тела, похудения и коррекции фигуры, предотвращения появления целлюлита и борьбы с морщинами.


Активный элемент аппарата генерирует ультразвуковые колебания с частотой 1 МГц, благодаря чему каждая клеточка вашего организма начинает работать, подкожные ткани приходят в тонус (сжимаясь и разжимаясь с частотой миллион колебаний в секунду). Такой эффект называется высокочастотным микромассажем на клеточном уровне, в результате которого нормализуется работа кожных желез, повышается уровень синтеза коллагена и эластина.

Одним из замечательных свойств ультразвука является его «разглаживающее» действие, способствующее рассасыванию уже сформировавшейся рубцовой ткани.


С помощью ультразвука можно проводить процедуры фонофореза. Ультразвук повышает активность воздействия препаратов, способствует их глубокому проникновению, увеличивает срок их действия. Поэтому наиболее эффективно использовать Систему по уходу за лицом и телом WELSS WS 7040 совместно со специальной косметикой по уходу за лицом и телом, рекомендованной специалистами WELSS.

Массаж лица


Проводите массажем:

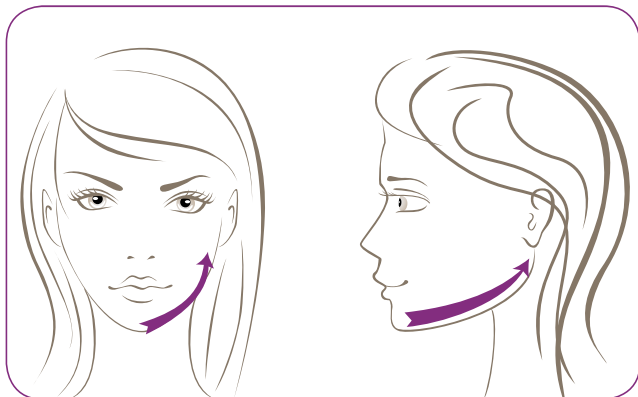


от подбородка до мочки уха

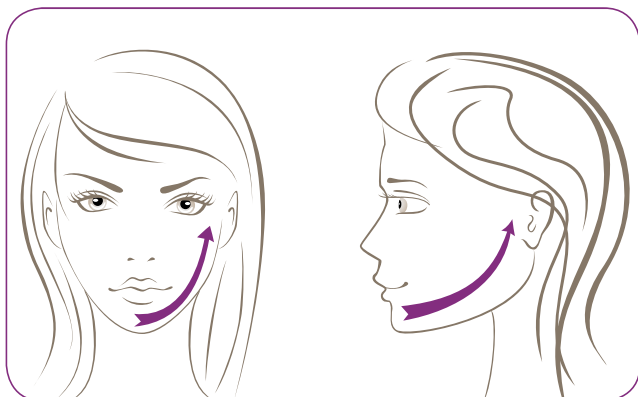


от подбородка до середины ушной раковины

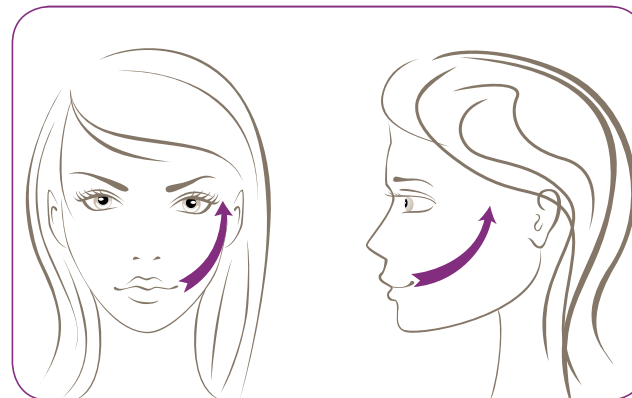


от уголка губ до виска

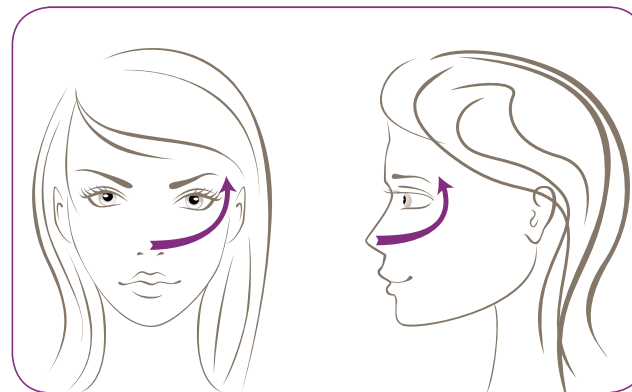

от кончика носа до уголка брови

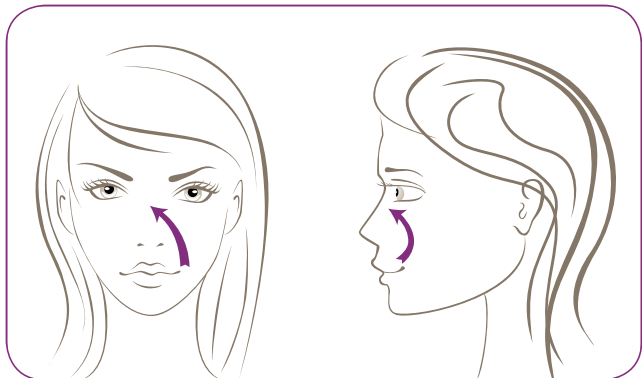


в области носогубных складок

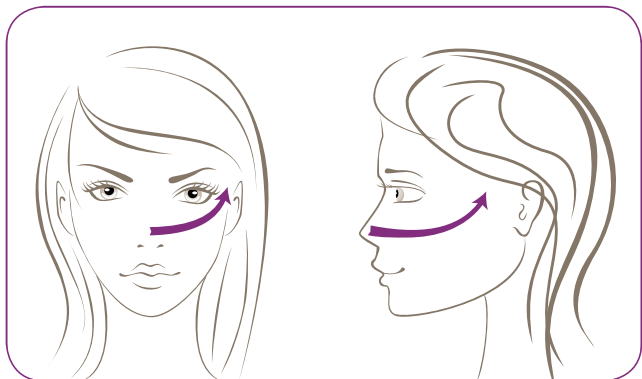


от кончика носа до виска

Для подтяжки двойного подбородка

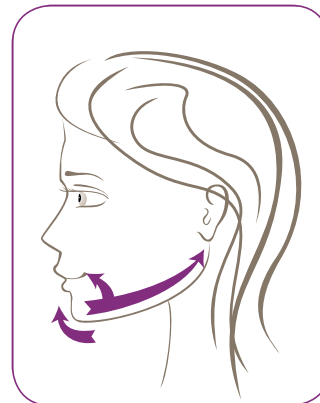


Проводите массажером от подбородка до мочки уха, от подбородка к уголку губ, от нижней части подбородка кверху. Важно не затрагивать область расположения щитовидной железы.

Для подтяжки лица

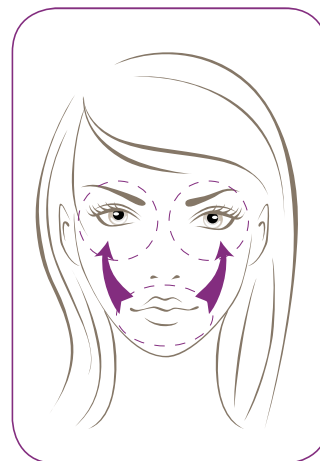


Проводите массажером от уголков губ к области «под глазами»

Устранение носогубных складок

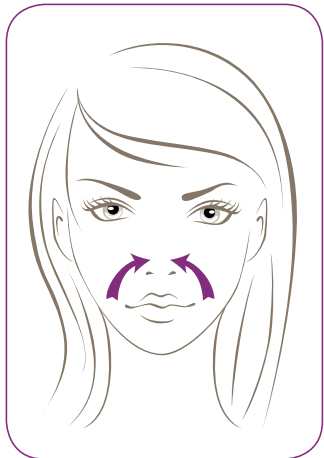

Проводите массажером от уголков губ к кончику носа.

Борьба с акне и экземой

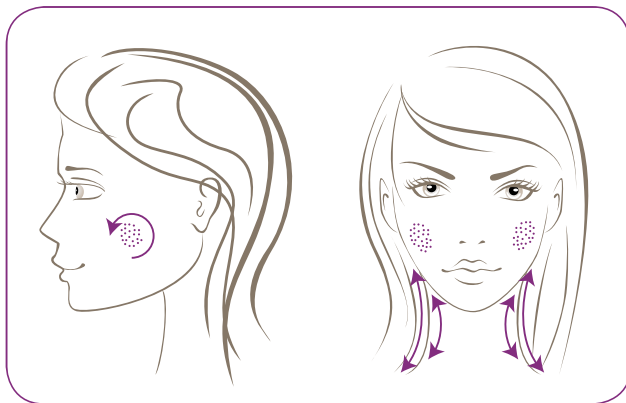

Используйте массажер исключительно вокруг пораженной области.

Массаж тела


Порядок выполнения процедуры (базовые схемы)

Область плеча и предплечья

Опустите руку, расслабьте мышцы. Выполняйте движения по внешней и внутренней сторонам от запястья к плечу.


Область внутренней и внешней стороны руки

Массажируйте руку винтообразными движениями от локтя к подмышечной впадине, огибая костные выступы.

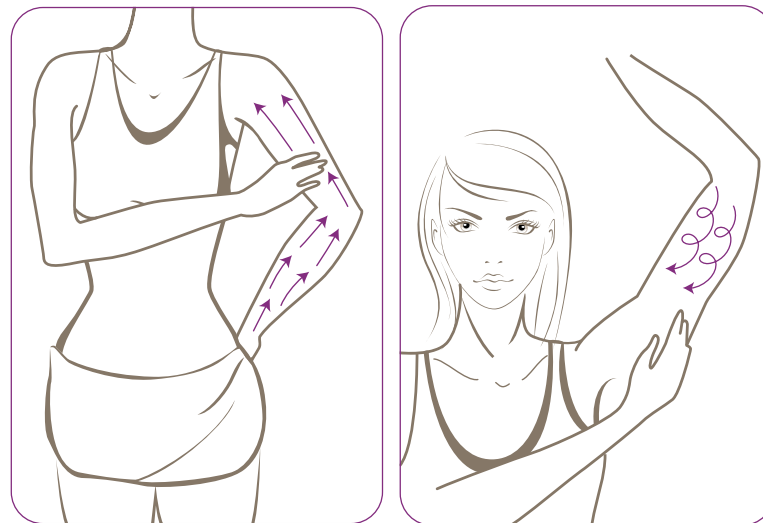

Область талии

Выполняйте круговые движения по часовой стрелке, втягивая при этом живот. Выполняйте дугообразные нисходящие движения.

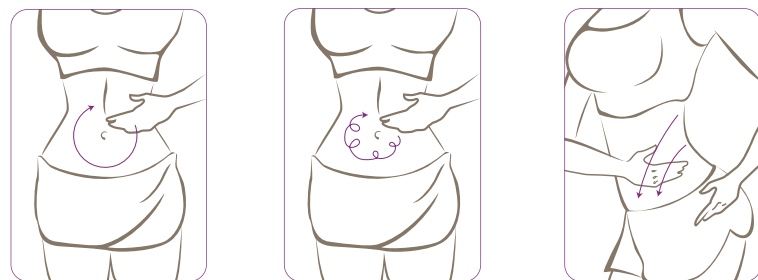


Область ягодиц

Круговые движения от центра к периферии.

Полукруговые восходящие движения от центра ягодиц к талии.

Винтообразные движения верхней части бедра.

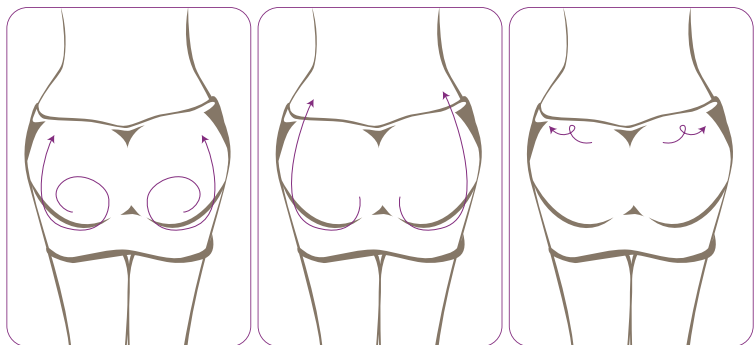

Стопа и голень

Движения снизу вверх от щиколотки до бедра.

Восходящие винтообразные движения от щиколотки.

Движения вокруг бедра по часовой и против часовой стрелки.



Гальванотерапия/ионотерапия

Гальванотерапия представляет собой использование в лечебных целях непрерывного постоянного электрического тока.

Основные функции режима «Galvanic»:

Глубокое очищение кожи

Питание и максимальное увлажнение

Отбеливание и устранение пигментации

Повышение воздействия косметических средств.

Под воздействием гальванического тока происходит расширение кровеносных сосудов, при этом ускоряется кровоток. В месте воздействия этого тока происходит выработка таких биологически активных веществ, как гистамин, серотонин и др.

Гальванический ток оказывает нормализующее влияние на функциональное состояние центральной нервной системы человека, способствует повышению функциональных возможностей сердца, стимулирует деятельность желез внутренней секреции. Он также приводит к ускорению процессов регенерации.

Шаг 1: Очистите кожу перед процедурой

Шаг 2: Подключите устройство к сети, нажмите кнопку «Power», после загорания индикатора устройство готово к работе.

Шаг 3: Нажмите кнопку «Galvanic» единожды для режима «ION-», дважды для режима «ION+», трижды для смешанного режима.

Шаг 4: Нанесите косметическое средство (для коррекции фигуры или по уходу за лицом) на участки лица или тела, которые вы предполагаете массировать. Важно, чтобы во время процедуры кожа всегда оставалась увлажненной.

Шаг 5: Нажмите кнопку «Galvanic» для завершения процедуры или переключения аппарата в другой режим.

Квантовая терапия

Терапия Bio RED - индикатор красного цвета, 16 светодиодов, длина волны 625+/-3нм.

В данном режиме массажер WELSS способствует смягчению и отбеливанию кожи, осветлению пигментных пятен, разглаживанию мимических морщин, сужению пор, накоплению протеина и коллагена.

Терапия Bio BLUE - индикатор синего цвета, 16 светодиодов, длина волны 465+/-3нм.

В данном режиме массажер WELSS способствует снижению воспаления, ускорению регенерации тканей, устранению угревой сыпь, лечению акне, разглаживанию рубцов и растяжек.

Терапия Bio Green - индикатор зеленого цвета, 16 светодиодов, длина волны 565+/-3нм.

В данном режиме массажер WELSS способствует восстановлению, обезвреживанию и выведению токсинов из кожи, улучшает ток крови и лимфы, что снимает отеки и придает вашей коже здоровый сияющий цвет.

Во время квантовой терапии рекомендуется надевать защитные очки.

Шаг 1: Перед процедурой тщательно очистите кожу.

Шаг 2: Подключите устройство к сети, нажмите кнопку «Power», после загорания индикатора устройство готово к работе.

Шаг 3: Нажмите кнопку «Photon» единожды для выбора терапии Bio RED, дважды для выбора терапии Bio Blue, трижды для выбора терапии Bio Green.

Шаг 4: Нанесите косметическое средство (для коррекции фигуры или по уходу за лицом) на участки лица или тела, которые вы предполагаете массировать. Важно, чтобы во время процедуры кожа всегда оставалась увлажненной.

Шаг 5: Нажмите кнопку «Photon» для завершения процедуры или переключения аппарата в другой режим.

Периодичность процедур	1-2 неделя	3-8 неделя	Поддержание результата
Ультразвуковой массаж	Ежедневно	3 раза в неделю	Раз в неделю
Гальванотерапия	Ежедневно	3 раза в неделю	Раз в неделю
Квантовая терапия	Ежедневно	Ежедневно	Раз в неделю

После процедур

Как естественный результат после массажа, возможны покраснение кожи (эритема) и припухлость (отек) на обработанных участках. Покраснение означает, что вы достигли желаемой цели. Вскоре после процедуры покраснения и припухлости проходят.

Спустя несколько минут после процедуры вы заметите результат - улучшается текстура и цвет кожи, повышается эластичность и упругость.

Клинические исследования показали, что в течение трех с половиной недель текстура кожи значительно улучшается, количество морщин сокращается на 16%, что является действительно потрясающим результатом. Тем не менее, результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи.

Возможные побочные эффекты

После использования ультразвукового массажера побочные эффекты встречаются крайне редко и носят временный характер.

Однако, если любой из нижеперечисленных побочных эффектов не проходит в течение 24 часов, обратитесь к врачу.

- Непрерывная боль
- Повреждение кожи (образование корки, волдырь, ожог)
- Атрофия кожи
- Кровоподтеки
- Умеренная головная боль

Противопоказания

Общие:

- Острый воспалительный процесс, температура.
- Болезни крови
- Тромбофлебиты
- Нарушения сердечного ритма
- Онкологические заболевания
- Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы
- Беременность

Местные:

- Рак кожи
- Присутствие в зоне воздействия аппарата металлических материалов, имплантированных в кости и ткани.
- Поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, экземы и дерматит в период обострения)

Уход

1. Убедитесь, что устройство отсоединено от электрической сети.
2. После каждой процедуры удаляйте остатки крема или геля, используя мягкую влажную ткань или бумажное полотенце. Затем устройство необходимо полностью высушить.
3. Устройство предназначено только для личного применения.
4. Храните массажер в сухом, недоступном для детей месте, обязательно в защитной коробке.

Устранение неполадок

Если устройство не работает, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что перед использованием устройство заряжалось не менее 3 часов.
2. Убедитесь, что кнопка «Power» была включена и световой индикатор загорелся.
3. Если шнур питания поврежден, обратитесь в сервисный центр для замены.
4. Если световой индикатор кнопки «Power» не загорается, когда шнур питания присоединен к устройству, свяжитесь с сервисным центром.

Технические характеристики

Система по уходу за лицом и телом WELSS WS 7040

Защитные очки - 1 шт.

Зарядное устройство - 1 шт.

Инструкция - 1шт.

Вес: 213 гр.

Размеры изделия: В 55мм х Д 235мм х Ш 75мм

Размеры упаковки: В 70мм х Д 260мм х Ш 180мм

Напряжение питания: DC 15 В

Сетевой адаптер: AC 240 В, 50 Гц/DC 15 В, 0.4 А

Частота ультразвука - 1 М Гц +/- 5%

Импортер:

ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня покупки

Телефон сервисного центра: +7 (495) 774-57-14

Завод-изготовитель:

Shenzhen Perfect Idea Tech. CO., Ltd., China/ Перфект Идея, Шэньчжэнь, Китай

www.welss.ru





Система по уходу
за лицом и телом
WELSS WS 7040

WS 7040



● Power

● Sonic



● Red

● Blue

● Green