


Вибрационный массажер для лица WELSS WS 7065.

Продукция компании WELSS — это ваш собственный косметологический салон!

Пожалуйста, перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Описание

- Выводит токсины, образующиеся в коже после длительного применения макияжа и косметических средств, осветляет пигментацию.
- Улучшает кровообращение, стимулирует регенерацию кожи, улучшает ее упругость.
- Устраняет морщины, мешки и отечность под глазами.
- Разглаживает кожу, стимулирует выработку коллагена, восстанавливает эластичность и упругость кожи.
- Снимает усталость и напряжение.
- Компактен позволяет спокойно носить его в Вашей косметичке.

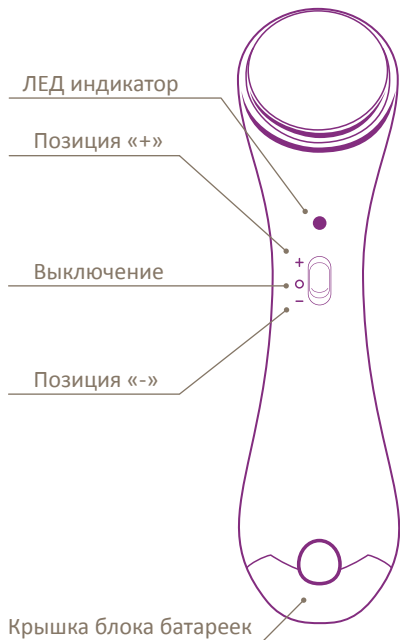

Инструкция по применению

Сдвиньте кнопку включения в позицию «+», чтобы начать процедуру. После чего загорится зеленый индикатор включения, и прибор начнет вибрировать. Положительно заряженные ионы через кожные покровы помогают питательным веществам глубоко проникать в кожу, а так же восстанавливает клетки кожи, улучшая ее структуру и цвет.

Сдвиньте кнопку включения в позицию «-», чтобы начать процедуру. После чего загорится красный индикатор включения, и прибор начнет вибрировать. Отрицательно заряженные ионы в комбинации с положительно заряженными ионами удаляют загрязнения на коже, очищают поры и улучшают её метаболизм.

Поставьте кнопку включения в позицию «0», чтобы выключить прибор.

При использовании не держите массажер на одном месте, а плавно водите им по лицу.

Используйте прибор не более 1-2 раз в день.

Не применяйте прибор, если у вас на коже есть повреждения

Меры предосторожности

Уход за прибором:

Убедитесь, чтобы прибор отключен перед тем, как протирать его. Если вы коснетесь до включенного устройства мокрым полотенцем или тканью, вас может ударить током.

Протирайте прибор влажной тканью после каждого применения.

Вытаскивайте батарейки из прибора, если он не используется в течение длительного времени.

Избегайте контакта прибора с водой.

Не чистите прибор едкими химическими веществами.

Храните прибор в холодном, сухом месте.

Не используйте прибор, если он поврежден

Несмотря на то, что прибор достаточно

крепкий, он может быть поврежден, если его уронить.

Поставьте новые батарейки, если старые полностью разрядились .

Утилизируйте израсходованные батарейки согласно нормам вашего государства.

Храните устройство в недоступном для детей месте.

Заметите батарейки в приборе, если световые индикаторы погасли или стали тускло гореть.

Технические характеристики:

Мощность: 0.1W.

Напряжение: DC3V.

Вибрация: 8500 об/мин.

Батарея: 3V. 3В 1шт (в ком-кт не входит)

Размер: 15x 4x3.5см.

Вес: 28гр.

Режим t°: 5-40°C.

Комплектация:

упаковка, устройство, инструкция.

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня покупки



Вибрационный массажер для лица WELSS WS 7065

Поставщик:

ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д.
9, стр. 3

Телефон сервисного центра:

+7 (495) 774-57-14

Завод изготовитель

Shenzhen Wochuan Electronic Co.,Ltd, China/
Вочуань Электроник, Шэньчжэнь, Китай

www.welss.ru



WS 7065

